



Note de service

DESTINATAIRES : À tous les utilisateurs des laboratoires Barrie Memorial et Suroît

EXPÉDITEUR : Marie-Ève St-Aubin, Chef de service laboratoire
Direction régionale des laboratoires
Laboratoire Barrie Memorial et Suroît

DATE : Le 22 février 2023

OBJET : **RAPPEL - Disposition d'étiquette pour échantillon RSOSI**

Nous avons constaté que plusieurs de nos partenaires internes et externes, apposent de façon inadéquate l'étiquette identifiant le patient pour les tests de dépistage RSOSI.


Veuillez prendre note de l'importance de bien apposer l'étiquette sur l'échantillon pour l'analyse de recherche de sang dans les selles (RSOSI).

Le laboratoire sous-traitant pour cette analyse reçoit un volume important en provenance des différents laboratoires du Québec et ne peut se permettre de réimprimer chaque étiquette.

Il est important de coller les étiquettes d'identification de façon qu'aucune étiquette ne recouvre le dessous du tube. **Une pellicule d'aluminium se situe en dessous du tube aucune autre étiquette ne doit toucher cette partie ou dépasser en bas du tube.**

Il est donc primordial de bien positionner l'étiquette afin que **le code-barres soit droit et lisible et que la date d'expiration de l'échantillon soit visible** tel que démontré ici-bas.

Bonne façon d'apposer l'étiquette

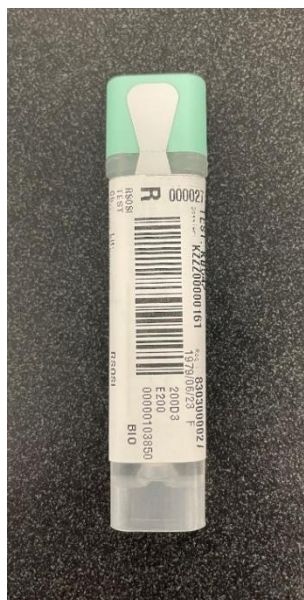

Merci de votre collaboration.