
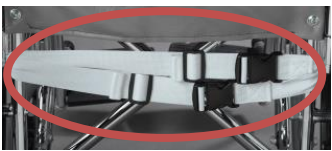



Rappel!

- Procéder à l'hygiène des mains selon les 4 moments.
- Utiliser seulement en position assise.
- Éviter l'utilisation si agitation ou contre-indication de compression abdominale.
- Vérifier l'état et l'installation de la ceinture avant chaque utilisation (coutures, courroies et boucles).
- Vérifier l'ajustement en présence d'une surface thérapeutique.
- Choisir la grandeur associée aux couleurs en fonction de la taille de l'usager.

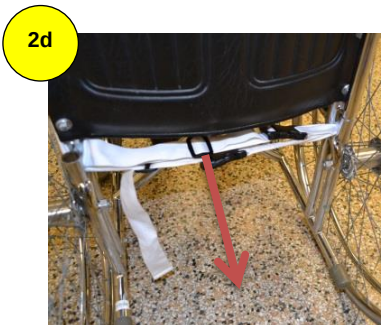

Étape 1. Installer la ceinture pelvienne sur le fauteuil

- a. Mettre la partie plus petite près du dossier du fauteuil et la partie avec l'étiquette face au siège.
- b. Insérer les courroies dans l'espace entre les appui-bras et le siège pour les fixer à l'arrière (contourner une structure pour éviter que la courroie puisse remonter).
- c. Fixer les courroies à l'arrière avec les boucles latérales et ajuster en glissant la boucle centrale pour s'assurer que la ceinture soit immobile sur le siège.

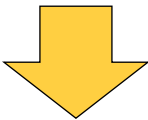

Étape 2. Installer l'usager sur le fauteuil

- a. S'assurer que l'usager soit bien assis au fond du fauteuil.
- b. Relever la partie avant de la ceinture sur l'usager en s'assurant qu'elle soit bien insérée au niveau des aines.
- c. Insérer les courroies au même endroit que les précédentes (doit former un angle de 45° et s'appuyer sur les hanches).
- d. Fixer les courroies à l'arrière du fauteuil et ajuster pour laisser l'épaisseur d'une main entre la taille de la personne et la ceinture.

N.B. : S'assurer que les extrémités n'entravent pas le mouvement du fauteuil.

- Faire un nœud avec le surplus de la sangle pour éviter le contact avec le sol.

NETTOYAGE :

- En présence de souillures visibles, revêtir l'équipement de protection individuel (EPI), rincer la contention dans le lavabo de l'utilité souillée et l'essorer.
- Attacher les courroies avec les boucles et la déposer dans un sac de lavage en filet, bien identifié (unité de soins).
- Suivre les processus de buanderie en place dans votre établissement :
 - Laver à la machine avec de l'eau chaude savonneuse à une température allant jusqu'à 71 °C (Ne pas utiliser d'eau de Javel).
 - Sécher à basse température.
- Retourner la contention avec le sac de lavage en filet sur l'unité identifiée.

Références : <https://www.posey.com/products/patient-safety-and-protection/belts-and-pelvic-holders/4430l-4430l-posey-foam-pelvic-holder>

Direction émettrice Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire

Entrée en vigueur : 2018-05

AMC-DSIEU-6022 (2019-10)

Révision : 2019-10-01