


Installation coussin sonore ou de la boucle de ceinture


Rappel !

- Procéder à l'hygiène des mains selon les 4 moments.
- S'assurer de l'installation et de la vérification conforme avant chaque utilisation.
- Ne remplace pas la supervision effectuée par le personnel.
- Ne jamais plier le coussin sonore (endommagement des capteurs).
- Ne jamais immerger le coussin dans un liquide.
- Identifier tous les coussins au feutre noir par la date de l'achat.

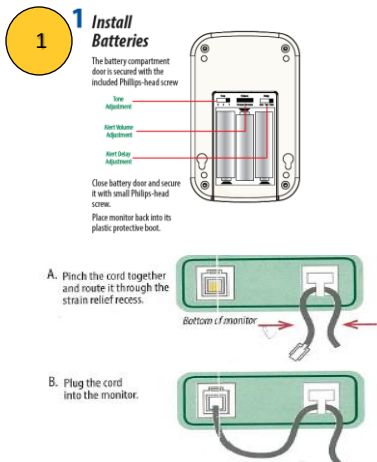

Étape 1 : Installation et programmation de l'appareil

- ✓ Installer les batteries. (Changer immédiatement les batteries si la lumière rouge «Low battery» s'allume et que l'appareil émet un son.)
- ✓ Programmer les 3 fonctions de l'appareil à l'intérieur du compartiment des batteries. (Type de son 1, 2 ou 3 ; le volume ; le délai de détection.)
- ✓ Installer l'enveloppe protectrice du moniteur (si requis).
- ✓ Brancher fermement le fil dans le sens de la flèche au coussin sonore (ou à la ceinture).
- ✓ Accrocher, à la base du moniteur, le fil du coussin sonore (ou de la boucle de ceinture) au crochet (image 1A) et insérer la fiche téléphonique (image 1B). La lumière rouge «Pad Lost» s'allume et l'appareil émet un son si le fil est mal branché.)

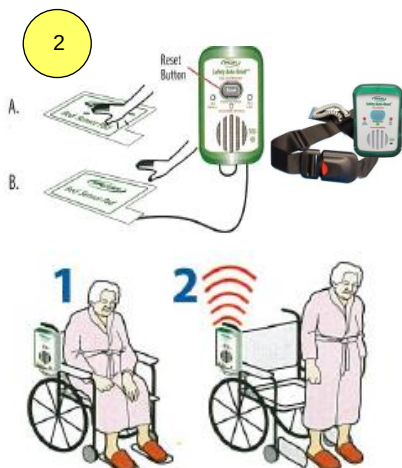


Étape 2 : Inspection initiale avant chaque quart de travail ou utilisation

- ✓ Inspecter l'intégrité du coussin sonore (absence de faux pli ou de déchirure).
- ✓ Vérifier l'emplacement et le positionnement du coussin sonore.
- ✓ Valider le fonctionnement du système, incluant les batteries.
 - Appuyer au centre du coussin sonore (ou attacher la ceinture). L'appareil émet 2 «BIP» et la lumière verte du «Monitor statut» clignote (image 2A).
 - Retirer la pression (ou détacher la ceinture). Le système émet le son d'alerte (image 2B).
 - Appuyer sur le bouton «Reset» pour arrêter l'alarme.



Étape 3 : Positionnement du tapis sonore

- ✓ Vérifier la position du coussin sonore dans le lit ou sur le fauteuil.
- ✓ Toujours placer le coussin sonore avec l'écriture vers le haut.
- ✓ Positionner le coussin en fonction du plan d'intervention :
 - Au lit : Sur le matelas dans le sens de la largeur, au niveau des épaules, du dos ou des hanches (seule l'épaisseur d'un piqué peut être ajoutée).
 - Au fauteuil : Sur l'assise (sous la surface thérapeutique).

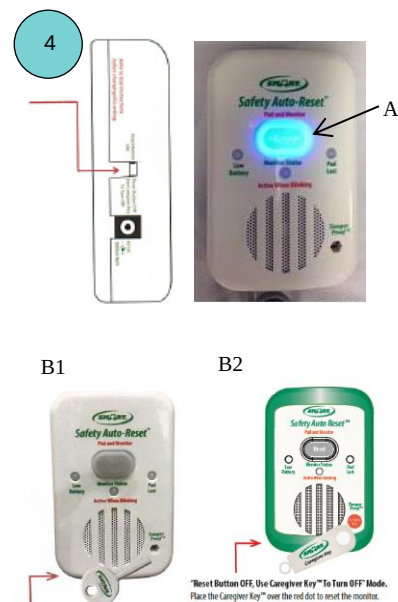

Étape 4 : Options de contrôle du «Reset» :

- ✓ Mettre le commutateur (situé sur le côté du moniteur) à la position souhaitée :
 - A. Sélectionner « Reset Button ON» :
L'alarme peut être arrêtée en appuyant sur le bouton «Reset» situé au-devant du moniteur.
 - B. Sélectionner « Reset Button OFF» (gestion limitée au personnel) :
L'alarme peut être arrêtée (selon le modèle) :
 1. En insérant la clé de sécurité dans l'orifice au-devant du moniteur, ou
 2. En plaçant la clé magnétique aimantée (ou autre aimant) sur la pastille rouge «Caregiver Key» située au bas à droite sur le devant du moniteur.

Rappel!

- ◆ Effectuer le nettoyage et la désinfection au départ, lorsque souillé et lors de la désinfection du matelas.
- ◆ Procéder à l'hygiène des mains avant et après l'intervention de nettoyage.
- ◆ Revêtir des gants et, au besoin, une blouse (si risque d'éclaboussures).

1



Étape 1 : Retirer le fil de l'appareil

Retirer délicatement le fil (éviter de briser la petite languette de plastique de la fiche téléphonique).

2



Étape 2 : Enlever l'enveloppe protectrice qui se trouve sur le moniteur (le cas échéant)

3A



Étape 3 : Nettoyer avec une lingette désinfectante

L'enveloppe protectrice
Le moniteur
Le fil
Le coussin sonore (ou la ceinture)

3B




En présence de souillures visibles dans de petits orifices difficiles à atteindre avec une lingette désinfectante, enfiler l'équipement de protection individuel (EPI) et utiliser préalablement une brosse jetable humidifiée pour déloger les saletés.

3C



Lors de précautions additionnelles, utiliser la lingette appropriée selon l'affiche en vigueur.

3D

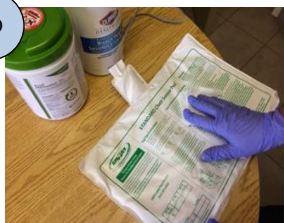

Étape 4 :

- ◆ Lorsque la désinfection est complétée, retirer l'EPI et procéder à l'hygiène des mains.
- ◆ S'assurer que le temps de contact entre le produit désinfectant et l'appareil soit respecté avant de remettre l'enveloppe protectrice sur le moniteur.
- ◆ Ranger toujours à plat le coussin sonore (ne jamais plier) pour protéger les capteurs et assurer son fonctionnement.
- ◆ Rapporter rapidement l'appareil non utilisé ou brisé.