




## Aide-mémoire – Système de mobilité TABS

### Installation du système TABS au fauteuil et au lit

#### Rappel !

- Procéder à l'hygiène des mains selon les 4 moments.
- S'assurer de l'intégrité et de l'installation conforme de l'appareil et du support.
- Valider le fonctionnement du système, avant chaque utilisation et en début de quart.
- Ne jamais immerger ou plier le coussin sonore.
- Ce dispositif n'a pas pour but de remplacer la supervision effectuée par le personnel.

A

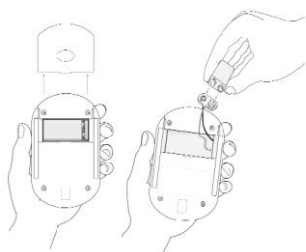


#### Installation et programmation de l'appareil

(Base, Voice+, Select ou Professionnal)

- Installer les batteries 9 volts ou installer le fil d'alimentation (disponible en option). Le voyant lumineux rouge indique le bon fonctionnement (une alarme sonore et lumineuse indique le niveau faible des batteries).
- Programmer l'appareil, si applicable (enregistrement d'un message vocal, choix de 4 tonalités).
- Installer le support du moniteur (voir directives au verso).
- Insérer le disque de métal de la cordelette dans la fente de l'appareil (choisir la couleur correspondant à la longueur).
- Accrocher la pince de la cordelette sur le vêtement (s'assurer que la cordelette est dégagée).
- Valider le fonctionnement du système en retirant le disque de métal de la cordelette de la fente de l'appareil (l'appareil émet une alarme).

L'appareil peut être installé sur le système de cloche d'appel (fil en option). Brancher le fil dans la fiche identifiée NURSE située sous l'appareil.

B

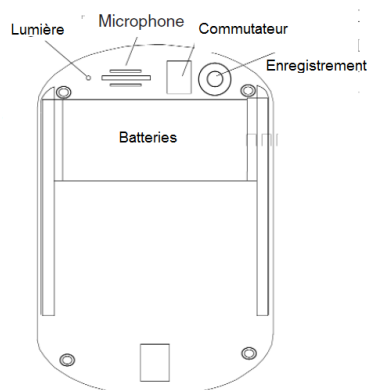

D-F




E



#### Entretien et nettoyage (moniteur support et coussin)

- Effectuer au départ, lorsque souillés et lors de la désinfection du matelas.
- Retirer le fil de l'appareil.
- Nettoyer, avec une lingette désinfectante, le moniteur, le fil, le support et le coussin sonore.
- En présence de souillures visibles dans de petits orifices difficiles à atteindre avec une lingette désinfectante, enfiler l'équipement de protection individuel (EPI) et utiliser préalablement une brosse jetable humidifiée pour déloger les saletés.
- Lors de précautions additionnelles, utiliser la lingette appropriée selon l'affiche en vigueur.

## Installation du système TABS au fauteuil et au lit


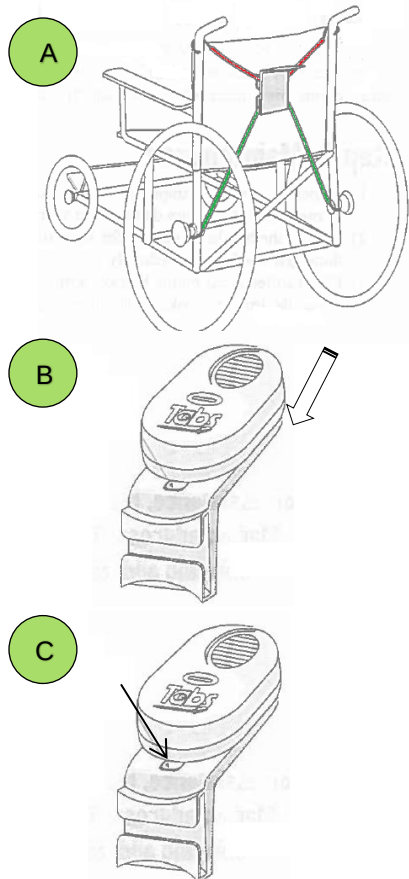


### Installation du support TABS au fauteuil roulant

- A. Placer les 2 courroies (rouge en haut et verte en bas) sur les encrages du support TABS (tablette vers le haut).
  - Accrocher les extrémités de la courroie rouge aux deux poignées du fauteuil.
  - Accrocher les extrémités de la courroie verte à 2 encrages fixe près des roues (sans nuire au roulement du fauteuil).
- B. Insérer le moniteur de mobilité TABS sur le support TABS (la base du moniteur en direction de l'utilisateur) en glissant sur les fentes (un clic se fait entendre).
- C. Pour retirer le moniteur, appuyer délicatement sur la languette et faire glisser le moniteur vers le haut.

### Avec coussin sonore au fauteuil

- D. Vérifier la position du coussin sonore (les écritures vers le haut) en fonction du plan d'intervention :
  - Sur l'assise (sous la surface thérapeutique).

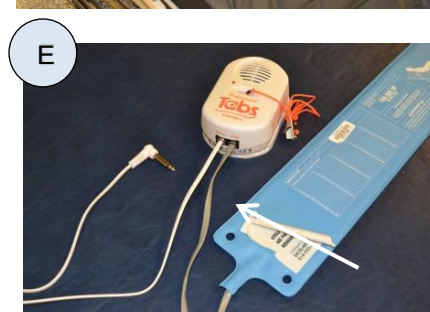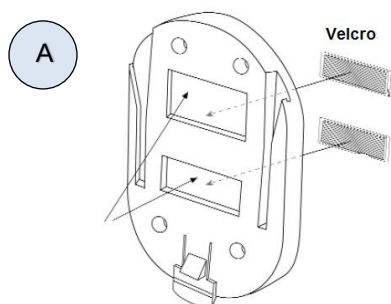

### Installation du support TABS au lit

- A. Placer une partie du velcro Dual Lock en haut, au centre et à l'avant de la tête du lit. Placer l'autre partie du velcro dans les fentes arrière du support. Puis, fixer le support.
- B. Insérer le moniteur sur le support en le glissant vers le bas sur les fentes (un clic se fait entendre).
- C. Pour retirer le moniteur, appuyer délicatement sur la languette et faire glisser le moniteur vers le haut.

### Avec coussin sonore au lit

- D. Vérifier la position du coussin sonore (les écritures vers le haut) en fonction du plan d'intervention :
  - Sur le matelas dans le sens de la largeur, au niveau des épaules, du dos ou des hanches (seule l'épaisseur d'un piqué peut être ajoutée).
- E. Brancher le fil du coussin sonore, sous l'appareil, dans la fiche identifiée PAD.