

## AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE Tube Salem Sump ENFit de Cardinal Health

### DESCRIPTION DU PRODUIT

#### A : Tubulure à double lumière Salem

- Utilisé pour alimentation entérale
- Utilisé pour drainage gastrique

#### B : Connecteur ENFit

- Préviens la connexion d'alimentation dans la mauvaise voie (ex. : IV)
- Compatible seulement avec seringue et tubulure de nutrition entérale ENFit

#### C : Prise d'air


- Compense la pression négative créée par l'aspiration
- Préviens l'invagination dans la muqueuse
- ⚠ Ne pas clamper; apposer la valve anti-reflux PRN
- ⚠ Ne pas injecter aucun liquide
- ⚠ Ne jamais brancher à la succion

#### D : Connecteur 5 en 1

- Adaptateur conique

#### E : Valve anti-reflux (non inclus, ajouter PRN)

- Empêche le contenu gastrique de remonter
- Permet le passage de l'air atmosphérique

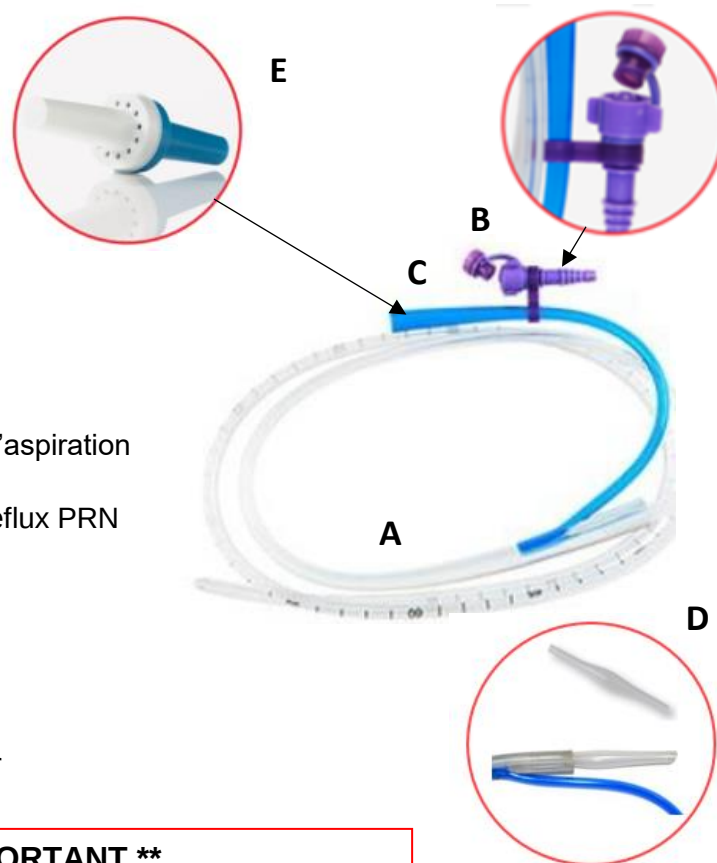


**\*\* IMPORTANT \*\***

**Changer le tube Salem q 10 jours**

### UTILISATION DU TUBE SALEM EN DRAINAGE LIBRE

- Connecter le sac collecteur à l'embout du tube Salem (tubulure transparente)
  - Utiliser le connecteur 5 en 1

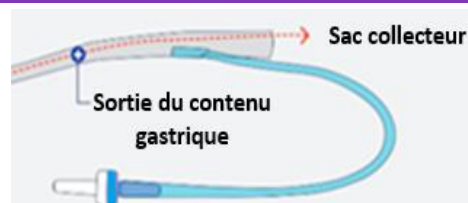

- Si du contenu gastrique s'échappe de la prise d'air (bleue), ajouter une valve anti-reflux
  - ✓ Embout bleu dans la tubulure bleue
  - ⚠ **Ne pas clamper. Ne pas injecter de liquide.**




- Les résidus gastriques et l'administration de médicaments ou de liquide se font **via la tubulure transparente**
  1. Déconnecter le sac collecteur; maintenir l'embout propre
  2. Effectuer le soin avec une seringue à embout conique
  3. Reconnecter le sac de drainage




### UTILISATION DU TUBE SALEM AVEC NUTRITION ENTÉRALE

- L'embout conique du connecteur ENFit s'insère dans le Salem via la tubulure transparente
- **Ne pas connecter dans la prise d'air (bleue)**
- S'assurer de bien verrouiller le connecteur ENFit et la tubulure d'alimentation entérale
- Si du contenu gastrique s'échappe de la prise d'air (bleue), ajouter une valve anti-reflux
- **Embout bleu dans la tubulure bleue**
- **Ne pas clamper. Ne pas injecter de liquide.**
- Nettoyer à l'eau tiède le connecteur ENFit q 24 h et PRN si souillé (*évite prolifération de bactéries*)

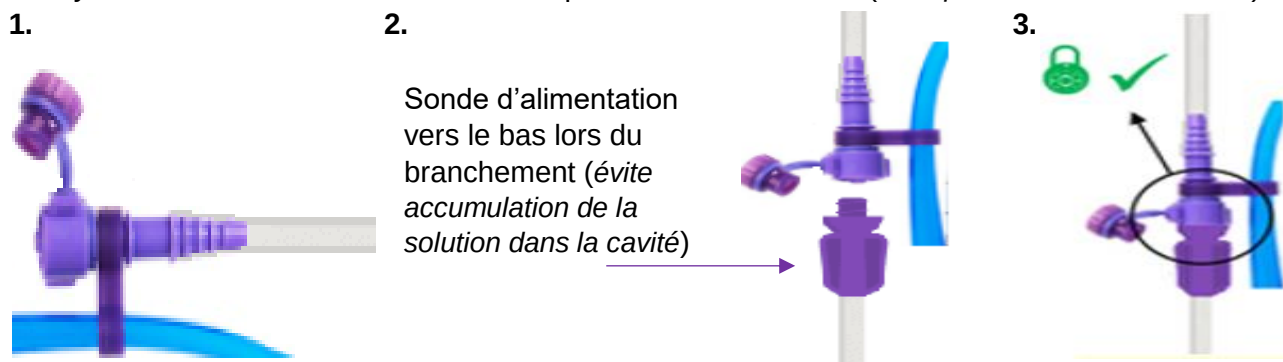

### UTILISATION DU TUBE SALEM SOUS SUCCION

- Une fois installé, injecter 10 mL d'air q 24 h via la prise d'air (bleue), tout au long du traitement sous succion (*évite invagination/compense la pression négative*)
- Connecter la succion à l'embout du tube Salem via la tubulure transparente
- **Ne jamais brancher la succion à la prise d'air (bleue)**
- Régler l'aspiration selon les paramètres prescrits
- Si du contenu gastrique s'échappe de la prise d'air (bleue), ajouter une valve anti-reflux.
- **Embout bleu dans la tubulure bleue**
- **Ne pas clamper. Ne pas injecter de liquide.**

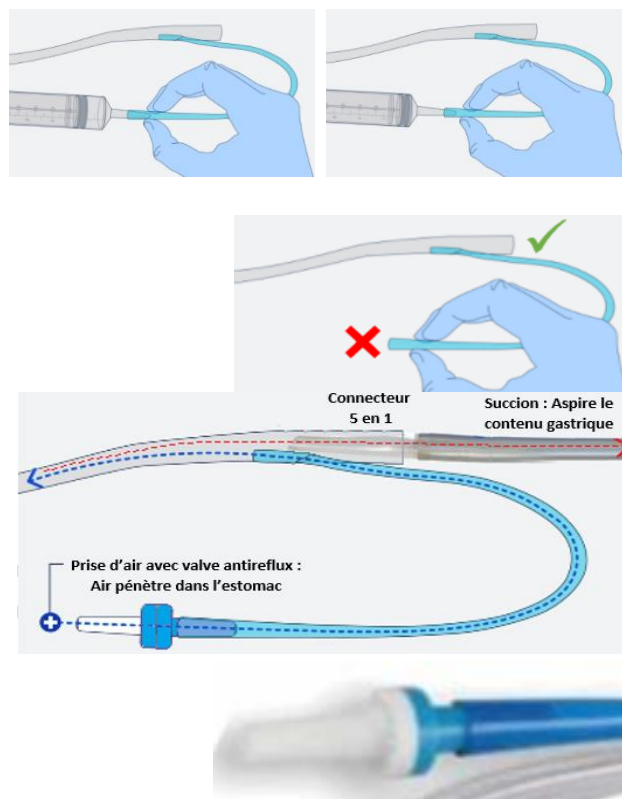

Références : Cardinal Health. Tube Salem Sump ENFit. Repéré à <https://www.cardinalhealth.com/nasogastric-tubes/salem-sump-pvc-tube-with-enfit-connection.html> CESSS. (2017). MSI : Insertion et retrait d'un tube nasogastrique. Repéré à <https://msi.expertise-sante.com>

Direction émettrice : Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire

Entrée en vigueur : 2022-03-03

AMC-DSIEU-6108 (2022-03)

Révision :