


AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE

Utilisation valve drainage thoracique P-EGGY

1. Connecteur pour tubulure de drainage
2. Valve anti-reflux (évite reflux des liquides drainés)
3. Valve unidirectionnelle pour l'air
4. Réservoir pour fuites d'air
5. Port de prélèvement sans aiguille pour vidange du réservoir (avec seringue)
6. Adaptateurs disponibles

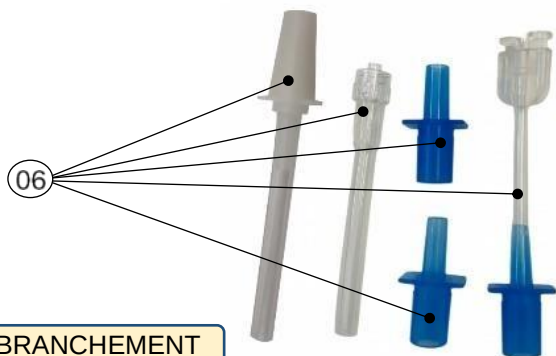

BRANCHEMENT

- Choisir l'adaptateur selon le type de drain installé
- Brancher l'adaptateur sélectionné (6) au connecteur pour tubulure de drainage (1) et brancher au drain du patient par la suite

DRAINAGE

- Le dispositif permet le drainage de l'air et du liquide pleural par gravité (drainage libre)
- **ATTENTION :** Une prescription est nécessaire pour appliquer la succion. Ce dispositif ne permet pas une succion

NE PAS CONFONDRE AVEC LE JACKSON-PRATT

→ **La poire du P-EGGY ne doit pas être comprimée**


VÉRIFICATION DE FUITE D'AIR

- La fuite d'air du patient peut être confirmée en ajoutant environ 1 ml de NACL 0,9% ou d'eau stérile dans le réservoir pour fuites d'air (4). Un bullage est normal dans le cas d'un pneumothorax. (Plus le pneumothorax se résorbe, moins il y aura de bullage.
- Videz le réservoir pour fuites d'air après utilisation.

PRÉLÈVEMENT

- Le P-EGGY possède un réservoir pouvant accumuler un maximum de 30 mL de liquide
- Un prélèvement du liquide peut être effectué par le Port de prélèvement sans aiguille pour vidanger le réservoir (avec seringue) (5)

Fig.1

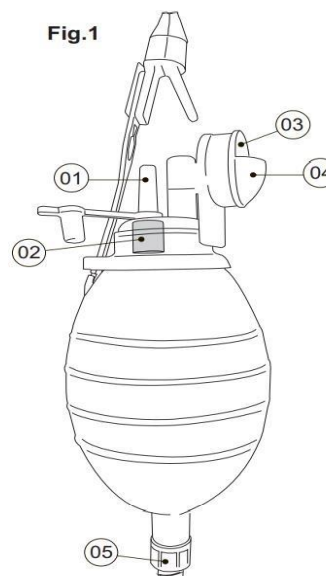

Pour irrigation =
Ordonnance médicale
requis

Ajouter un robinet 3 voies au bout de l'adaptateur avant de brancher au drain
Se référer à
AMC-DSIEU-6138



Références : Redax (2023). P-Eggy drain chest drain valve. Repéré à <https://pdf.medicaexpo.com/pdf/redax/p-eggy-drain-chest-drain-valve>
Redax (2021). P-Eggy drain Valve de drainage thoracique Accessoire pour drainage percutané UNICO

Direction émettrice : Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire

Entrée en vigueur : 2023-10-13

AMC-DSIEU-6150 (2023-10)

Révision :