


NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES :	Tous les gestionnaires, les médecins et le personnel des directions cliniques et de la gestion de l'approvisionnement
EXPÉDITEUR :	Roxanne Forgues, conseillère en soins infirmiers – évaluation et harmonisation des produits, DSIEU Amélie Senez, cheffe de service des achats, DL Yanic Bélanger, chef de service de la gestion contractuelle, DL
DATE :	Le 26 octobre 2026
OBJET :	Arrivée des nouveaux bracelets d'identification

Dans le cadre des démarches visant à améliorer la **durabilité et la lisibilité des informations d'identification des usagers**, de nouveaux bracelets munis d'un **protecteur** seront progressivement introduits dans les secteurs concernés.

L'ajout d'un protecteur vise à **réduire l'usure de l'impression** et à maintenir les informations lisibles pendant toute la durée du séjour de l'utilisateur.

Le nouveau bracelet est destiné aux impressions réalisées avec des **imprimantes à transfert**. Son coût est plus élevé que celui de l'ancien bracelet.

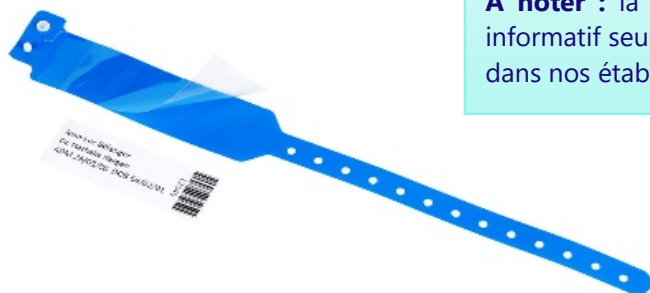

À noter : la photo présentée est fournie à titre informatif seulement. Le bracelet qui sera distribué dans nos établissements sera de couleur blanche.

Codes GRM :

1139445 BRACELET IDENT ADULTE

1139446 ETIQUETTE 2 X 3 PO POUR BRACELET IDENT ADULTE 926-10

1019396 BRACELET IDENT ADULTE BLANC AVEC SURFACE IMPRESSION (ancien bracelet)

Principales caractéristiques

Les nouveaux bracelets :

- sont munis d'un **protecteur transparent** recouvrant la zone imprimée;
- offrent une meilleure protection contre les **frottements, l'humidité et les désinfectants hydroalcoolisés**;
- visent à prolonger la durée de lisibilité des informations imprimées.

Consignes d'utilisation

Lors de l'installation du bracelet, il est important de :

- vérifier que les informations imprimées sont **lisibles et conformes** à l'identification de l'utilisateur;
- s'assurer que le protecteur est correctement positionné sur la zone imprimée;
- éviter de retirer ou de décoller le protecteur;
- remplacer le bracelet si les informations deviennent illisibles, endommagées ou ne permettent plus une identification sécuritaire de l'utilisateur;
- signaler toute problématique observée lors de l'utilisation.

Transition vers les nouveaux bracelets

La distribution des nouveaux bracelets se fera progressivement dans les secteurs concernés utilisant des imprimantes à transfert. L'ancien bracelet **1019396 – BRACELET IDENT ADULTE BLANC AVEC SURFACE IMPRESSION** restera en circulation dans certaines unités de service; il ne sera donc pas remplacé dans l'ensemble des secteurs.

Une attention particulière sera portée à la **performance des nouveaux bracelets en contexte réel** afin de confirmer leur durabilité et leur facilité d'utilisation.

Nous vous remercions de votre collaboration dans le cadre de cette transition et vous invitons à nous transmettre toute observation ou problématique rencontrée lors de l'utilisation des nouveaux bracelets.

RF, AS, YB