



ASSTSAS



Ensemble en prévention

Comment mettre et retirer l'APR Architect Pro de Medicom

Sylvain LeQuoc, conseiller - ASSTSAS

26 mars 2021

- 
- 1- Comment inspecter l'APR
 - 2- Comment mettre l'APR
 - 3- Comment vérifier l'étanchéité de l'APR
 - 4- Comment retirer l'APR
-

Partie supérieure

Bande nasale



Nom de l'APR

Partie inférieure



Numéro de lot


1- Comment inspecter l'APR Architect Pro avant de le mettre

Lavage de
mains avant
de prendre
un APR N95



4- Ouverture
(soudure)

1- Bande nasale
ajustable

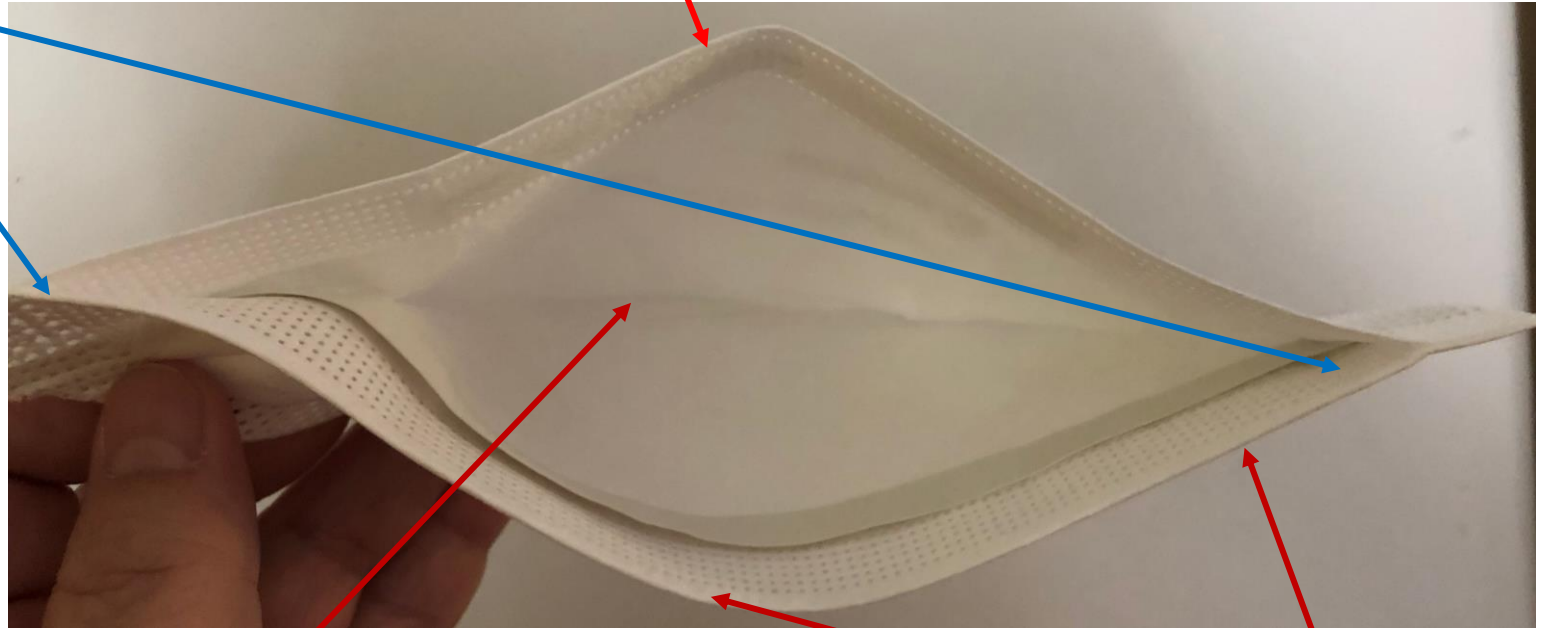

3- Filtre

2- Pourtour

5- Vérifier les courroies et les points d'attache






Tirer légèrement sur la courroie



Distance nécessaire pour passer les courroies par-dessus la tête


2- Comment mettre l'APR Architect Pro

- Étape 1 : séparer les courroies

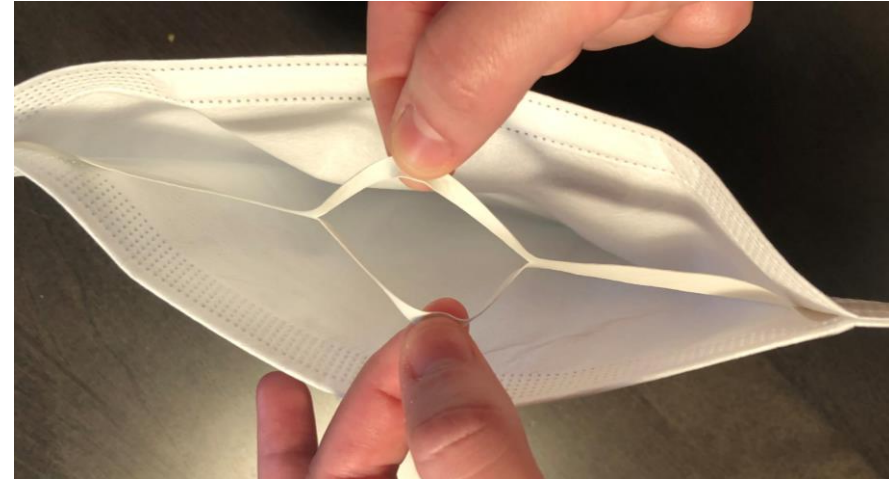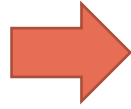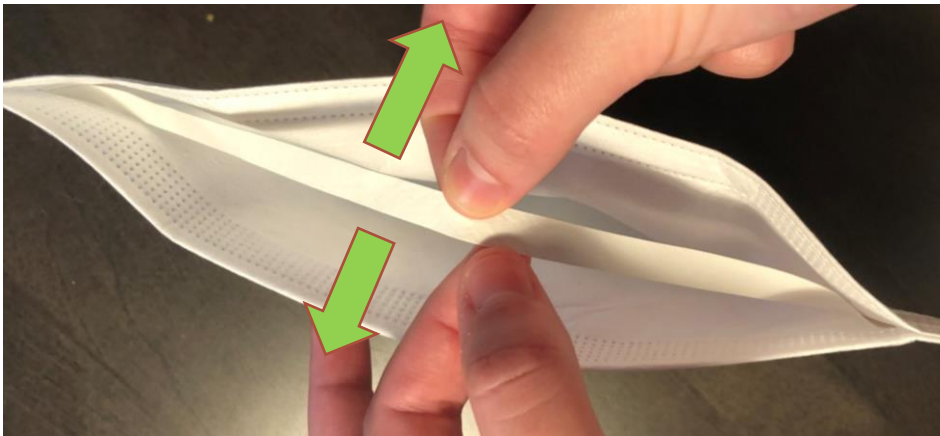

2- Comment mettre l'APR Architect Pro

Étape 2 : ajuster la bande nasale

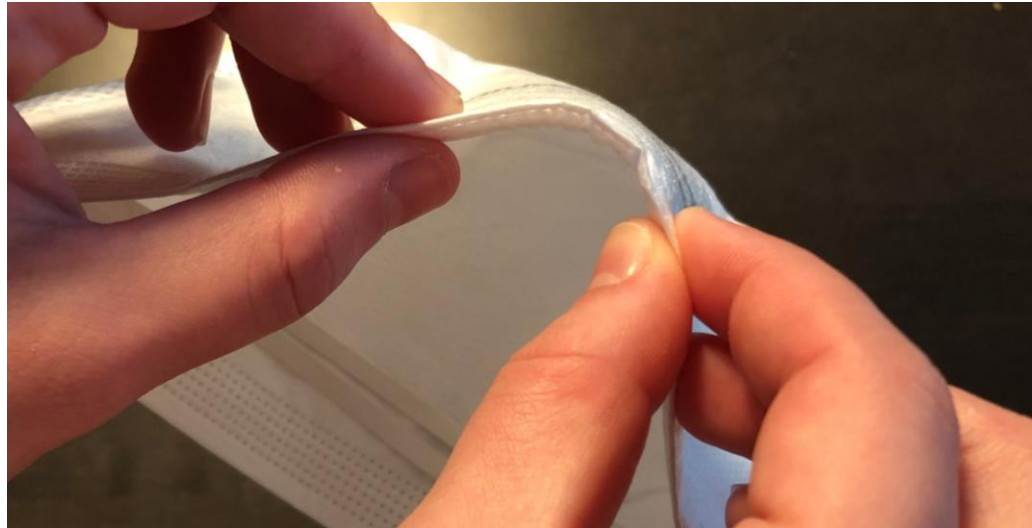

2- Comment mettre l'APR Architect Pro

Étape 3 : installer l'APR sous le menton et sur le nez. Faire passer les deux courroies par-dessus la tête et les déposer sur la nuque.



Ajuster l'APR à environ 1 à 1,5 cm du bord du menton

Étape 4 : Saisir une des deux courroies et l'installer sur le dessus de la tête.



2- Comment mettre l'APR Architect Pro

Autre méthode pour installer
les courroies

1 – Déposer la première courroie
sur le dessus de la tête

2– Déposer la deuxième
courroie sur la nuque



2- Comment mettre l'APR Architect Pro

■ Étape 6 : ajuster l'APR au visage



S'assurer de bien dérouler la bordure inférieure de l'APR.



- À deux mains, appliquer une pression des doigts à tous les 2 mm en commençant par la crête du nez.
- Correspond à environ 8 à 10 pressions.

Éliminer toute fuite d'air pouvant passer par un ajustement inadéquat de la bande nasale.



3- Comment faire le test d'étanchéité l'APR Architect Pro

Test d'étanchéité en pression négative et positive



À surveiller :



Demander à l'utilisateur d'expirer de l'air par la bouche en direction des yeux.




Si l'utilisateur détecte une fuite au niveau de la bande nasale, lui demander de la réajuster.

- Procéder à l'essai d'ajustement seulement si le test d'étanchéité est concluant.




Essai d'ajustement qualitatif (EAQL)

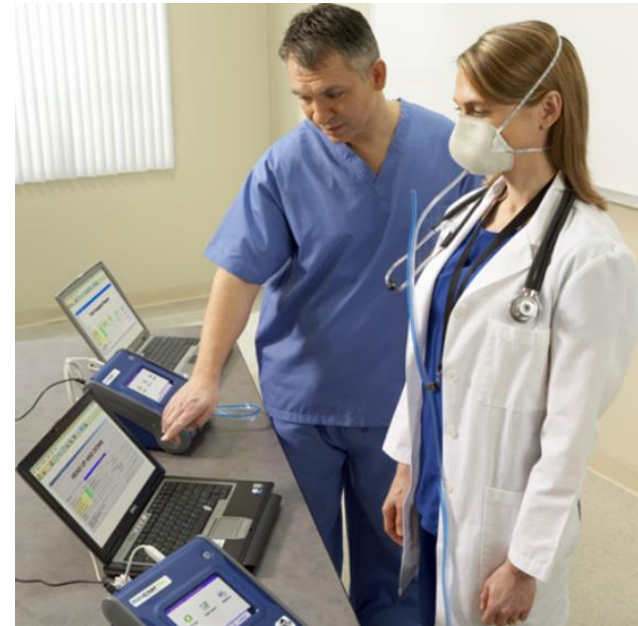

Essai d'ajustement quantitatif (EAQN)

4- Comment retirer l'APR Architect Pro

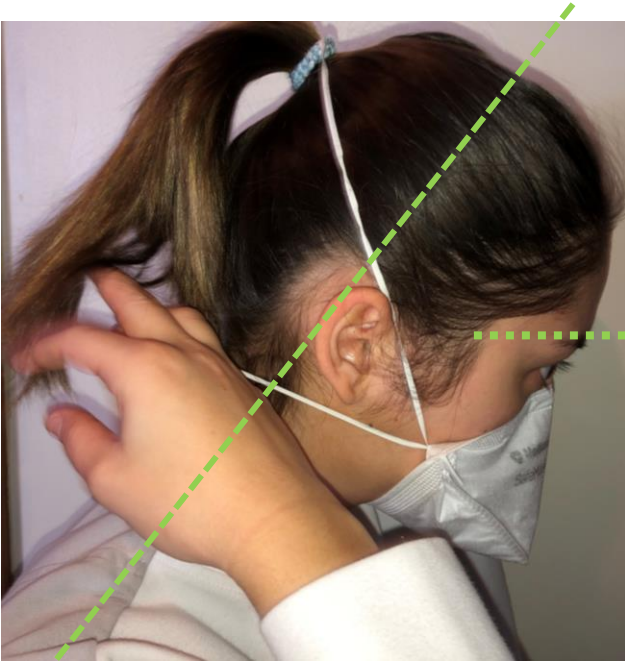

- Se pencher légèrement vers l'avant.
- Saisir la courroie inférieure.



- En ramenant la courroie inférieure vers l'avant, saisir la courroie supérieure.
- Terminer le mouvement vers l'avant.



- Éloigner l'APR vers l'avant
- Disposer de l'APR

Sylvain LeQuoc

Conseiller en prévention

slequoc@asstsas.qc.ca

Tél. : 514 253-6871, poste 222

Montréal

7400, boul. des Galeries d'Anjou, bureau 600
Montréal (Québec), H1M 3M2
Tél. : 514 253-6871
ou 1 800 361-4528

Québec

260, boul. Langelier
Québec (Québec), G1K 5N1
Tél. : 418 523-7780
ou 1 800 361-4528

En ligne

asstsas.qc.ca