
DESTINATAIRES : Tous les gestionnaires cliniques, conseillères en soins infirmiers, personnel infirmier, gestion de l'approvisionnement.

EXPÉDITEURS : Christelle Robert, Coordonnatrice activités cliniques et pratiques professionnelles en soins infirmiers, DSI
Roxanne Forgues, conseillère en soins infirmiers - Évaluation et harmonisation des produits, DSI

DATE : Le 15 juin 2026

OBJET : **Disponibilité des rallonges pour boutons de gastrostomie Mic-Key GRM 1109559**

Des usagers provenant de centres d'hébergement ou d'autres CISSS peuvent être admis dans nos installations avec un bouton de gastrostomie en place. Afin de permettre l'administration de la nutrition entérale, de l'hydratation ou des médicaments, une rallonge compatible avec le bouton est requise pour la connexion à une seringue ou à un sac de gavage.

Cardinal a cessé la distribution de ses boutons de gastrostomie. Les boutons Mic-Key constituent désormais le modèle disponible au CISSSMO.

Dans le cadre de la transition vers les produits Mic-Key, il est important de rappeler que les rallonges sont généralement compatibles uniquement avec les boutons du même fabricant.




Vous trouverez ci-joint, le mode d'emploi pour l'utilisation de ce produit.
Nous vous invitons à diffuser cette information auprès des personnes concernées.

Merci de votre précieuse collaboration,

RF

Consignes

1. Les rallonges destinées aux boutons de gastrostomie Mic-Key sont maintenant disponibles au magasin des hôpitaux sous le **GRM 1109559**
2. Avant toute utilisation, le personnel doit vérifier le modèle de bouton de gastrostomie en place afin de s'assurer de la compatibilité de la rallonge.
3. Bien que les boutons Cardinal ne soient plus distribués au CISSMO, certains usagers provenant d'autres CISSS ou de centres d'hébergement pourraient toujours être porteurs de ce type de bouton en raison des inventaires encore disponibles dans ces établissements.
4. Les rallonges Cardinal n'étant plus disponibles, il ne sera pas possible de connecter un sac de gavage ou une seringue à ces dispositifs à l'aide d'une rallonge compatible.
5. Lorsqu'un usager est porteur d'un bouton Cardinal et qu'une rallonge est requise, le remplacement du bouton par un modèle Mic-Key devra être évalué selon la situation clinique de l'usager et les procédures en vigueur.

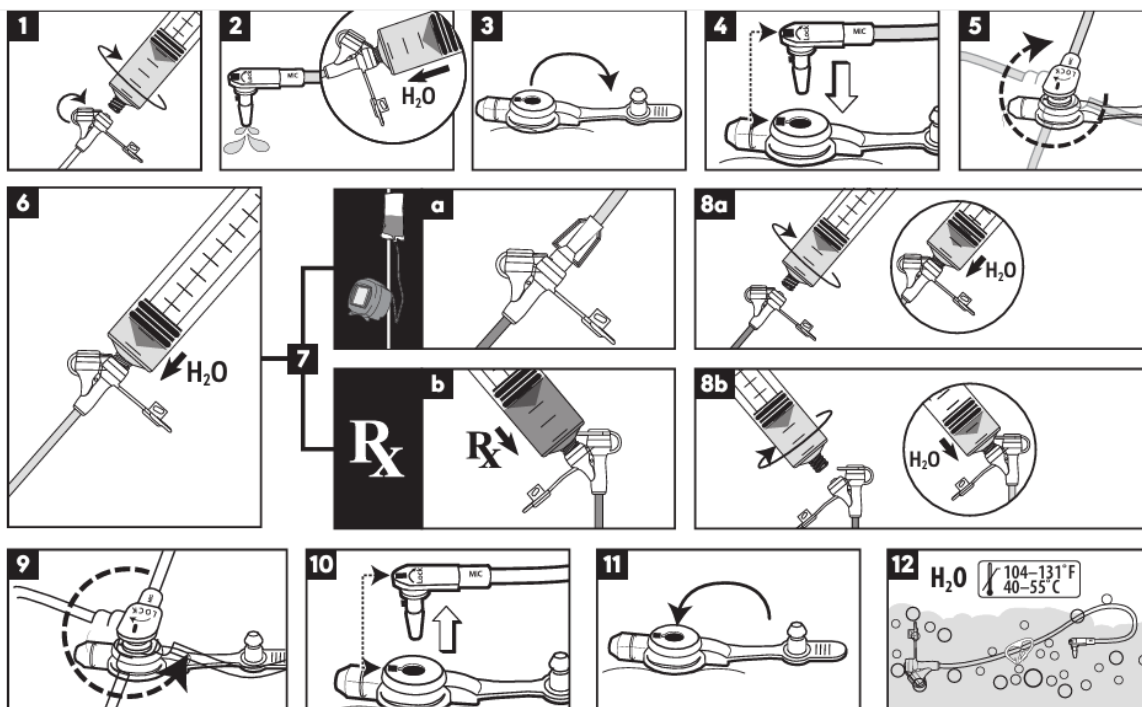

Note : La rallonge Mic-Key est un dispositif réutilisable selon le fabricant. Toutefois, en contexte hospitalier, elle sera considérée comme un dispositif jetable.

Code GRM	Code d'article	Dimension	Description	indication	Illustration
1133022	8140-18-1,5	18FR X 1,5CM	Tube gradué en silicone avec ballonnet gastrique pour rétention interne	Alimentation à long terme. Seulement compatible avec l'ensemble d'alimentation entérale MIC-KEY ^{MD} en bolus et en continu	
1093465	8140-18-2.5	18FR X 2,5CM			
1117466	8140-18-2.0	18FR X 2,0 CM			
1119012	8140-18-3.0	18FR X 3,0CM			
1065735	8140-18-4.0	18FR X 4,0CM			
1004111	8140-20-2.0	20FRX 2,0CM			
1110378	8140-20-2.5	20FRX 2,5CM			
1101370	8140-24-2.5	24FR X2,5CM			
1109559	0141-12	S. O.	Ensemble d'alimentation entérale MIC-KEYMD en bolus et en continu ENFIT	Cette rallonge est requise pour connecter un sac de gavage ou une seringue à un bouton de gastrostomie Mic-Key.	