


BD AutoShield^{MC} Duo

Aiguille de sécurité avec double système d'auto-verrouillage pour stylo injecteur


Instructions d'utilisation

Pour calibre 30 (0.30mm) x 5mm


1

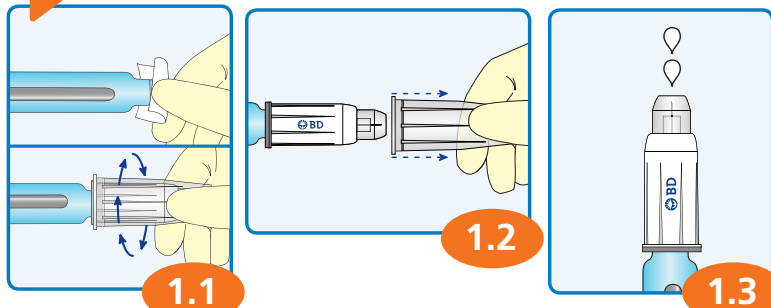

2

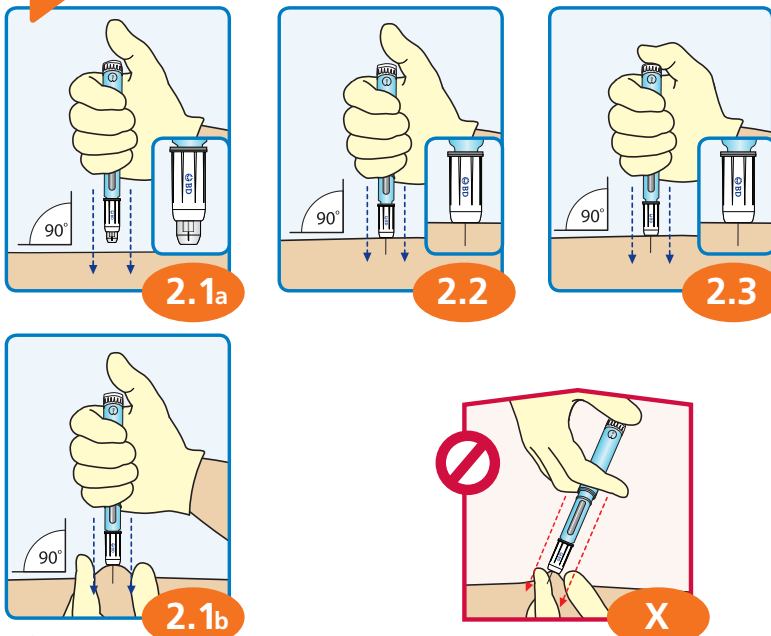


3

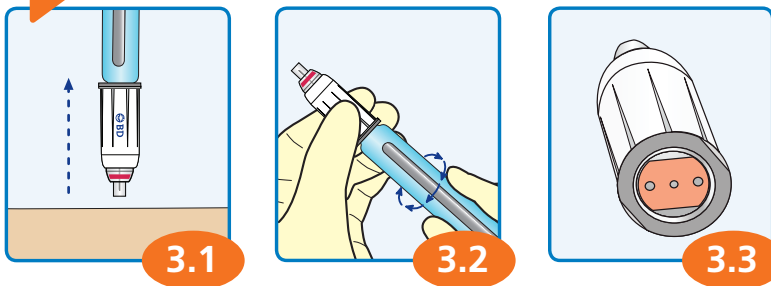


L'aiguille pour stylo-injecteur BD AutoShield^{MC} Duo est conçue pour être utilisée avec des dispositifs d'injection de médication de type stylo.

Ce produit offre deux embouts sécuritaires qui se bloquent automatiquement après usage (côté patient) et lors du retrait de l'aiguille du stylo injecteur (embout connecteur du stylo). Les embouts ainsi bloqués aident à diminuer la possibilité de blessures causées par les deux extrémités de l'aiguille.

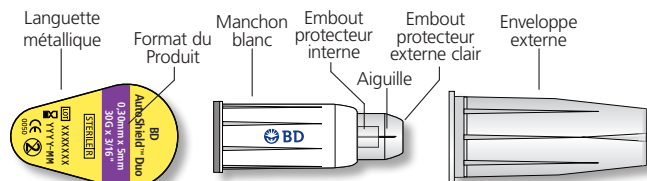


Avant usage

Enveloppe externe couvre l'aiguille

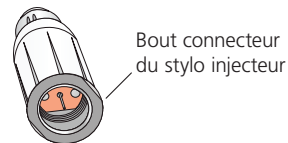

Après usage

Embout protecteur activé avec bande indicatrice rouge

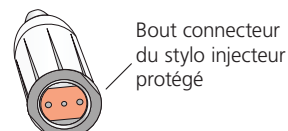

L'abdomen est le site d'injection privilégié

1. Fixer l'aiguille au stylo injecteur† pour effectuer l'injection

1.1 Vérifier l'intégrité de chaque sachet avant l'utilisation. Nettoyer le sceau de caoutchouc du stylo selon votre technique habituelle ou le protocole proposé. Retirer la languette métallique de l'aiguille. En maintenant l'enveloppe externe, pousser et visser l'aiguille dans le sens des aiguilles d'une montre sur le stylo injecteur, jusqu'à ce qu'il y ait une résistance.

1.2 Retirer UNIQUEMENT l'enveloppe externe.

1.3 Toujours vérifier l'écoulement de l'insuline dans l'aiguille avant chaque injection en amorçant le dispositif selon les étapes suivantes. Prélevez 2 unités, pointez le stylo vers le haut et appuyez sur le bouton injecteur. Une goutte ou un jet de liquide devrait apparaître au bout de l'aiguille. Sinon, répétez le processus tel que recommandé selon les instructions du stylo injecteur. Si le stylo injecteur ne s'amorce toujours pas, changer l'aiguille et répéter les étapes d'amorçage.

Note: Une goutte de liquide pourrait retomber dans l'embout protecteur, ce qui pourrait entraîner un excédant de fluide laissé sur la peau suite à l'injection.

2. Effectuer l'injection

Régler la dose prescrite sur le stylo injecteur (selon les instructions du fabricant). Tenir le stylo injecteur tel qu'illustré. Votre pouce ne devrait pas être sur le bouton d'injection à cette étape-ci.

Insérer l'aiguille directement dans la peau en un mouvement continu jusqu'à ce que l'embout externe clair et le manchon blanc soient au niveau avec la peau.

Référez-vous aux figures 2.1a, 2.2 et 2.3.

Maintenir une pression constante contre la peau et injecter la dose en appuyant sur le bouton d'injection à l'aide de votre pouce. **NE PAS** retirer l'aiguille avant que la dose soit complètement injectée. Se référer aux directives du fabricant du stylo injecteur pour obtenir les temps d'injections recommandés.

S'il y a un risque potentiel d'injection intramusculaire, faire usage d'un pli cutané large de façon à tenir 2,5cm de peau entre les doigts lorsque le pli est complété.

Référez-vous à la figure 2.1b.

X Technique inexacte

NE PAS pincer moins de 2,5cm de peau entre les doigts.

ÉVITEZ de tenir le stylo injecteur dans un angle, de la même façon que l'on tiendrait une seringue à insuline.

NE PAS injecter avec l'aiguille pointant à un angle dirigé vers les doigts, ceci pourrait causer une piqûre accidentelle.

3. Retrait de l'aiguille à stylo injecteur

3.1 Dès que la dose complète a été injectée, retirer le stylo injecteur de la peau. L'embout protecteur interne se déploiera automatiquement et se verrouillera. **Une bande indicatrice de couleur rouge** apparaîtra, confirmant que l'embout protecteur est verrouillé et que l'aiguille a été utilisée.

3.2 Toujours tenir l'aiguille à stylo par le manchon blanc lors de son retrait. Tourner le stylo-injecteur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

3.3 Le bout connecteur du stylo injecteur est protégé. La protection est assurée lorsque l'embout orange se déploie et couvre l'aiguille.

NE PAS placer vos doigts sur l'embout protecteur activé.

Disposer de l'aiguille utilisée dans un contenant prévu à cet effet.

Note: Disposer adéquatement de tout emballage de plastique.

† Liste des stylos injecteurs et doseurs sur l'emballage.



Ne pas réutiliser