

FICHE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION- SATUROMÈTRE SUR ROULETTES

MATÉRIEL REQUIS

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant
- ✓ Linge en microfibre avec une solution nettoyante-désinfectante

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS

Procéder à l'hygiène des mains
Mettre des gants propres

Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant :

1. Le moniteur électronique
2. Le fil du saturomètre
3. La pince du saturomètre
4. Le panier
5. La poignée de transport

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE APRÈS UTILISATION AUPRÈS D'UN USAGER SOUS PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES OU PÉRIODIQUE


Procéder à l'hygiène des mains
Mettre des gants propres

Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant :

1. Le moniteur électronique
2. Le fil du saturomètre
3. La pince du saturomètre
4. Le panier
5. La poignée de transport
6. La tige au complet
7. Le cordon d'alimentation
8. Le pied de l'appareil et les roues

En présence de précautions additionnelles, se référer à l'affiche correspondante afin de choisir la technique et le matériel de désinfection appropriés.

VISUEL

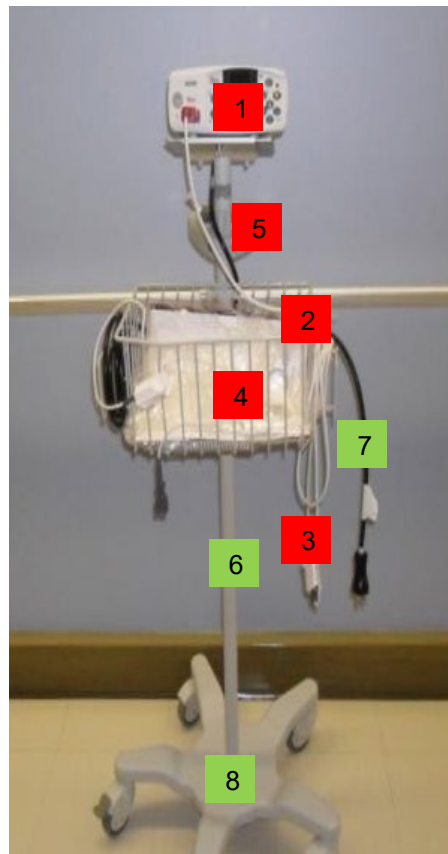

FRÉQUENCE ET RESPONSABILITÉ

FRÉQUENCE :

- Entre les différents usagers
- Désinfection quotidienne selon l'utilisation: high touch & low touch

RESPONSABILITÉ DE LA DÉSINFECTION :

- L'utilisateur (ex : infirmière, PAB, médecin, professionnel, etc.)
- Les personnes désignées par le gestionnaire



HIGH TOUCH



LOW TOUCH