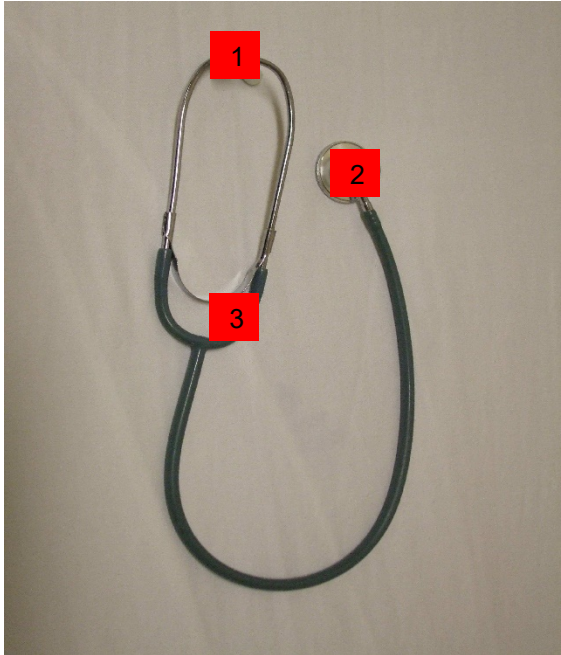


FICHE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION- STÉTHOSCOPE

MATÉRIEL REQUIS
✓ Gants à usage unique ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant ✓ Linge en microfibre avec une solution nettoyante-désinfectante

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS
Procéder à l'hygiène des mains Mettre des gants propres Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant : 1. Les embouts 2. Le pavillon 3. La tubulure : Le corps de l'instrument (tiges de métal et de caoutchouc)

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE APRÈS UTILISATION AUPRÈS D'UN USAGER SOUS PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES OU PÉRIODIQUE
En présence de précautions additionnelles, se référer à l'affiche correspondante afin de choisir la technique et le matériel de désinfection appropriés.

VISUEL


FRÉQUENCE ET RESPONSABILITÉ
FRÉQUENCE : - Entre les différents usagers - Désinfection quotidienne selon l'utilisation: high touch & low touch RESPONSABILITÉ DE LA DÉSINFECTION : - L'utilisateur (ex : infirmière, PAB, médecin, professionnel, etc.) - Les personnes désignées par le gestionnaire

	
HIGH TOUCH	LOW TOUCH