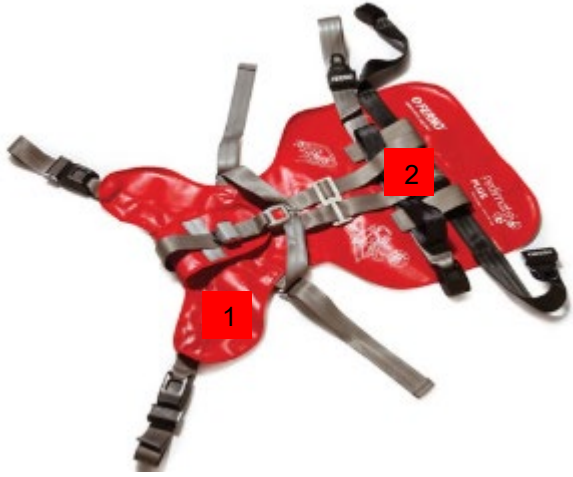


FICHE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION- PEDI-MATE

MATÉRIEL REQUIS
✓ Gants à usage unique ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant ✓ Linge en microfibre avec une solution nettoyante-désinfectante

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS
S'assurer de l'intégrité de l'équipement, s'il y a lieu, aviser le gestionnaire si l'équipement n'est plus intact. Procéder à l'hygiène des mains Mettre des gants propres Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant : 1. Le harnais 2. Les boucles

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE APRÈS UTILISATION AUPRÈS D'UN USAGER SOUS PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES OU PÉRIODIQUE
En présence de précautions additionnelles, se référer à l'affiche correspondante afin de choisir la technique et le matériel de désinfection appropriés.

VISUEL


FRÉQUENCE ET RESPONSABILITÉ
FRÉQUENCE : - Entre les différents usagers - Désinfection quotidienne selon l'utilisation: high touch & low touch RESPONSABILITÉ DE LA DÉSINFECTION : - L'utilisateur (ex : infirmière, PAB, médecin, professionnel, etc.) - Les personnes désignées par le gestionnaire

	
HIGH TOUCH	LOW TOUCH