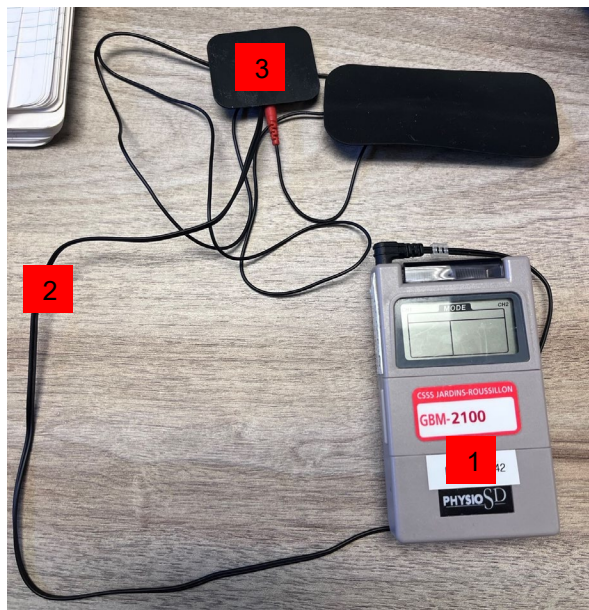


FICHE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION- STIMULATEUR NEUROMUSCULAIRE ET ÉLECTRODES NON ADHÉSIVES – TENS

MATÉRIEL REQUIS	
✓ Gants à usage unique ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant ✓ Linge en microfibre avec une solution nettoyante-désinfectante	

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS	VISUEL
Procéder à l'hygiène des mains Mettre des gants propres Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant : 1. Le moniteur de l'appareil 2. Les fils 3. Les électrodes	

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE APRÈS UTILISATION AUPRÈS D'UN USAGER SOUS PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES OU PÉRIODIQUE
En présence de précautions additionnelles, se référer à l'affiche correspondante afin de choisir la technique et le matériel de désinfection appropriés.

FRÉQUENCE ET RESPONSABILITÉ
FRÉQUENCE : - Entre les différents usagers - Désinfection quotidienne selon l'utilisation: high touch & low touch RESPONSABILITÉ DE LA DÉSINFECTION : - L'utilisateur (ex : infirmière, PAB, médecin, professionnel, etc.) - Les personnes désignées par le gestionnaire

	
HIGH TOUCH	LOW TOUCH