


PURGE DE LA TUBULURE DE PERFUSION PLUMSET^{MC}


ÉTAPE 1

PRÉPARATION DE LA TUBULURE DE PERFUSION


Utilisez une technique aseptique pour préparer la tubulure de perfusion pour la purge et procédez ensuite comme suit :

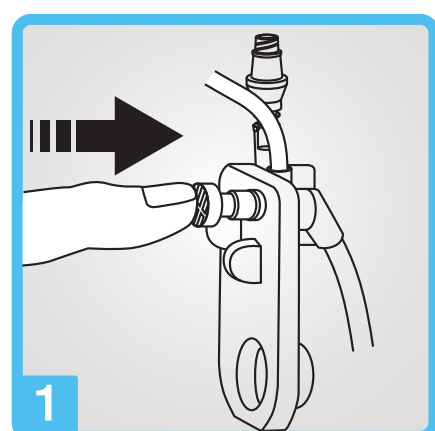


Appuyez sur le régulateur de débit pour le fermer, et assurez-vous que l'écoulement est interrompu pendant la purge.

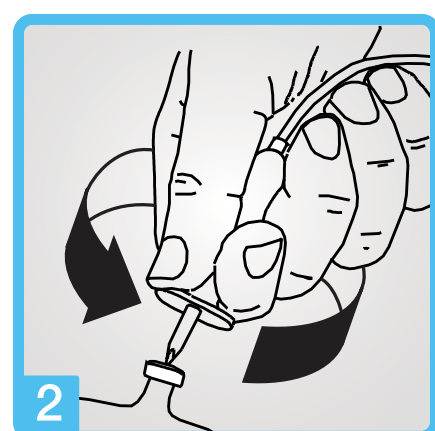

Insérez le perforateur dans l'orifice du réservoir de solution en le tournant. **Avant de procéder, assurez-vous que le réservoir n'est pas suspendu au-dessus de la pompe.**

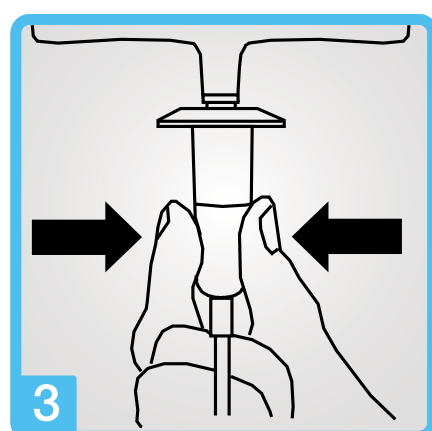


Suspendez le réservoir à une tige à solutés. Pressez la chambre compte-gouttes jusqu'à ce qu'elle soit remplie jusqu'au trait. **Ne la remplissez pas entièrement.**

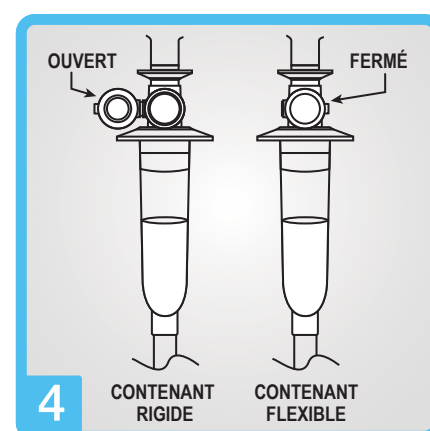


Si vous utilisez un contenant de solution qui est rigide (p. ex., une bouteille de verre), ouvrez le capuchon de la prise d'air du filtre située au-dessus de la chambre compte-gouttes. Si vous utilisez un sac de solution, fermez le capuchon de la prise d'air du filtre.

ÉTAPE 2

PURGE DE LA TUBULURE DE PERFUSION

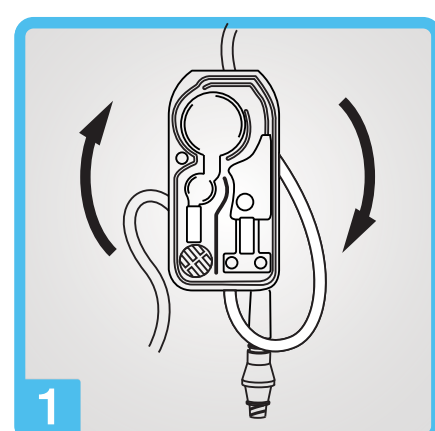


Retournez la cassette à l'envers de manière à ce que le site d'injection auxiliaire pointe vers le bas.

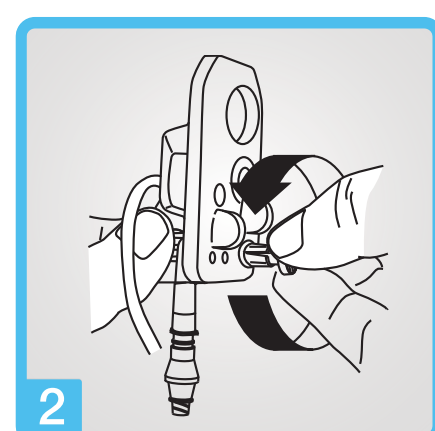


Tout en maintenant la cassette à l'envers, ouvrez lentement le régulateur de débit en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, afin que la solution s'écoule dans la cassette à un débit constant.

NOTE : Il est possible d'interrompre rapidement l'écoulement en tout temps en appuyant sur le régulateur de débit.

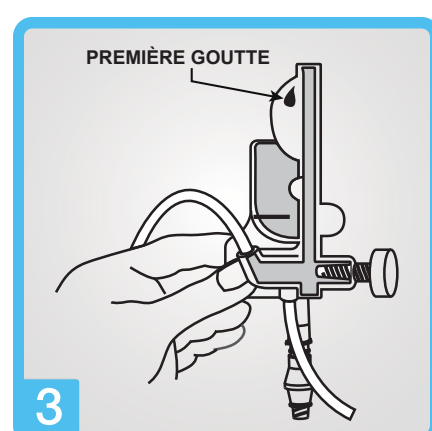


Lorsque la première goutte apparaît dans la chambre de pompage, remettez la cassette à l'endroit.

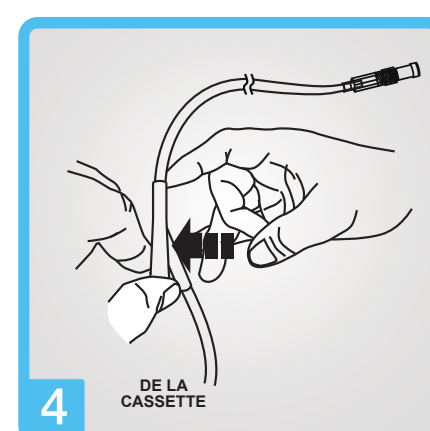

Continuez la purge jusqu'à ce que tout l'air soit éliminé de la cassette et du reste de la tubulure. Tapotez la cassette, les sites d'injection en Y et la tubulure pour déloger les bulles d'air.


NOTE : Si le filtre situé à l'extrémité de la tubulure devient mouillé, vous devez ouvrir le capuchon pour poursuivre la purge.

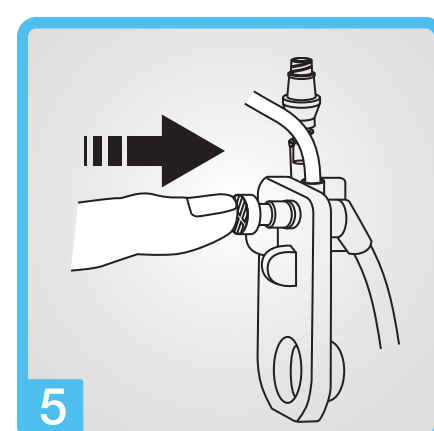


La purge terminée, appuyez sur le régulateur de débit pour le fermer. Assurez-vous que l'écoulement est interrompu.

ÉTAPE 3


INSTALLATION DE LA CASSETTE

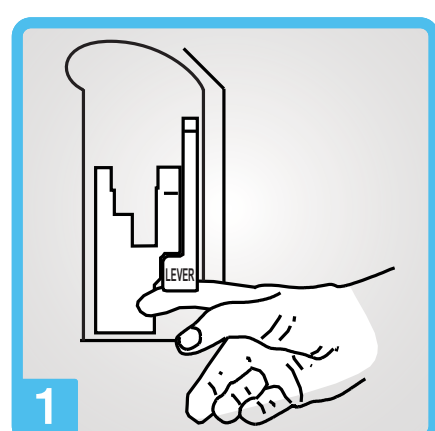


Soulever le levier pour ouvrir la porte de la cassette.

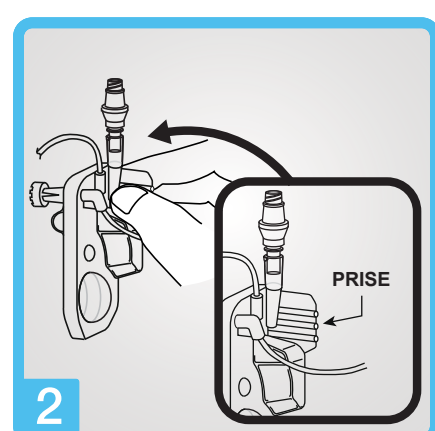

Saisissez la cassette par la prise prévue à cet effet.

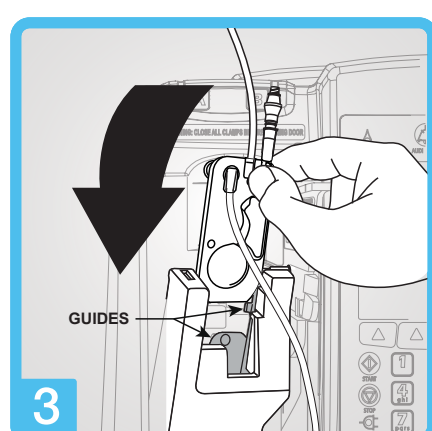

Glissez la cassette entre la porte et les guides de la porte.

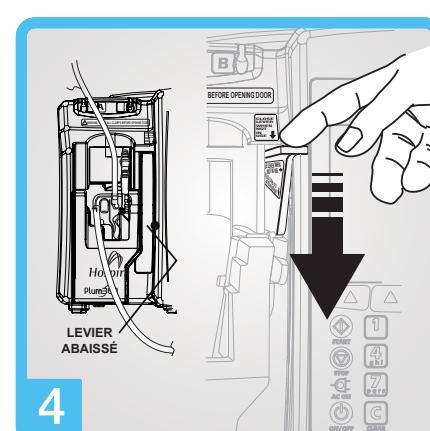

Abaissez le levier pour fermer la porte de la cassette. Dans le cas de la pompe Plum 360^{MC}, insérez le segment proximal de la tubulure dans le guide de la voie A.

NOTE : Avant d'utiliser la pompe, veuillez consulter le manuel d'utilisation du système de perfusion Plum pour obtenir les instructions complètes.

Références utilisées : 430-97315-001 (D, 2014-06) Manuel d'utilisation du système de perfusion Plum 360^{MC} à utiliser avec Hospira MedNet^{MC}; 430 95491-005 (A, 2013-02) Manuel d'utilisation du système de perfusion Plum A+^{MC} à utiliser avec Hospira MedNet^{MC}.