Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Montérégie-Ouest
Québec

AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE

Pompe Hospira PLUM 360

Programmation avec une liste de médicaments


Étape 1 : Sur l'écran de perfusion (A/B), sélectionnez une voie à programmer.

Si vous programmez une perfusion principale, sélectionnez la voie A.

Si vous programmez une perfusion secondaire, sélectionnez la voie B.



Étape 2 : Sur l'écran Programme, sélectionnez *Liste de médicaments*.

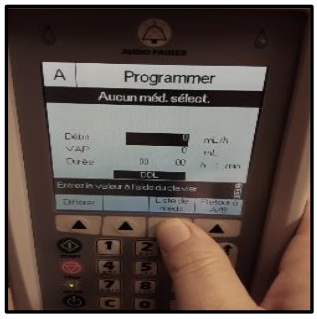

Étape 3 : Dans la liste de médicaments, sélectionnez le médicament.



Étape 4 : Sélectionnez l'unité de dose.



Étape 5 : Sélectionnez la concentration du médicament dans le réservoir, comme requis pour les unités de dose sélectionnées.



Références : Hospira (2016), Plum 360™ Pompe Manuel d'utilisation du système, 246p.

AMC-DSIEU-6070 (2020-11)

AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE
Pompe Hospira PLUM 360
Programmation avec une liste de médicaments

Étape 6 : Sur l'écran de programmation, saisissez la concentration, le volume du réservoir, le poids ou la surface corporelle, selon le cas.




Étape 7 : Saisissez le débit et/ou la dose, le volume à perfuser (VAP) et la durée, selon ce qui convient pour les paramètres du programme affichés. Ces valeurs peuvent être saisies dans n'importe quel ordre.




ATTENTION! AVANT DE DÉMARRER LA PERFUSION, VÉRIFIEZ LES VALEURS SAISIES.


Étape 8 : Appuyez sur *DÉBUT*.

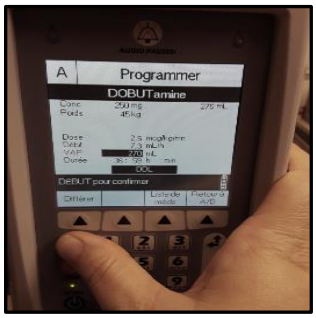

Étape 9 : Appuyez sur *Oui.* Confirmez le programme.

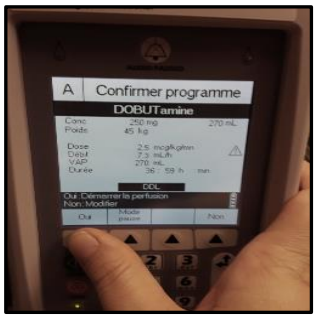

Étape 10 : Écran final.

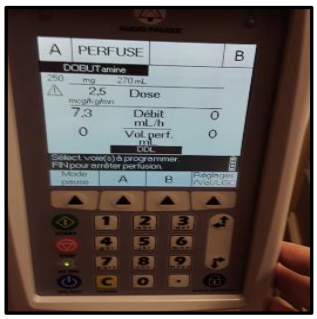

Références : Hospira (2016), Plum 360™ Pompe Manuel d'utilisation du système, 246p.			
Direction émettrice :	Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire	Entrée en vigueur :	2020-11-12
AMC-DSIEU-6070 (2020-11)		Révision :	