



MÉTHODE PAR POMPE CADD SOLIS VIP FICHE D'ENSEIGNEMENT D'ANTIBIOTHÉRAPIE INTRAVEINEUSE AMBULATOIRE

Pour mieux vous guider

Qu'est-ce que la méthode par pompe à perfusion ambulatoire (CADD Solis VIP) ?

Cette méthode permet que
votre antibiotique soit donné
aux heures prescrites par
le médecin, et ce, de façon
automatique via la pompe
à perfusion.

L'antibiotique est préparé
en sac qui est relié à une
tubulure. Cette tubulure
est fixée en tout temps
à votre cathéter.

La pompe administrera,
24 heures sur 24, une petite
quantité de médicaments
pour éviter que votre cathéter
intraveineux se bloque.

Coût des antibiotiques

Les antibiotiques peuvent être remboursés en partie ou en totalité
par votre assurance privée ou le Régime d'assurance médicaments
du Québec au même titre que les autres médicaments. Pour plus de
renseignements, informez-vous à votre assureur.

Précautions à prendre pour la pompe CADD Solis VIP

- Toujours garder la pompe dans le sac fourni.
- Toujours dormir avec la pompe dans le lit; **ne pas la déposer sur la table de chevet.**
- Ne pas immerger la pompe dans l'eau.

Autres précautions à prendre

- S'assurer de conserver les antibiotiques selon les directives
de la pharmacie (réfrigérateur ou température pièce).
- Éviter :
 - de mouiller votre pansement (aucune immersion dans l'eau).
*Lors du bain ou de la douche, couvrir votre cathéter avec
une pellicule de plastique, de façon étanche.*
 - les sports de contacts ou les gestes répétés
(ex. : jouer au tennis).
Ces activités peuvent déplacer ou briser votre cathéter.
 - les travaux manuels qui exigent une grande force physique.
 - de retirer votre pansement de cathéter.
Assurez-vous que la rallonge est bien fixée.
 - les pressions indues sous le bras du côté de votre cathéter
(ex. : béquille, ne pas l'appuyer directement sous l'aisselle
du côté du cathéter).



Précautions additionnelles pour les enfants :

- Si votre enfant est porteur d'un cathéter, attention de ne pas
mettre trop de pression sous l'aisselle du côté du cathéter
lorsque vous le soulevez.
- Éviter l'éducation physique ou toutes les activités avec risque
de chute (ex. : planche à roulettes, glissade sur tube,
de se chamailler ou se bagarrer, etc.).
Ces activités peuvent déplacer ou briser le cathéter.
- Les enfants du primaire doivent demeurer auprès
de la surveillante dans la cour de récréation OU demeurer
à l'intérieur.

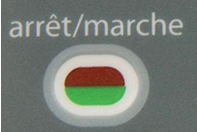
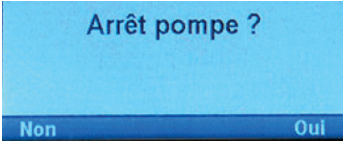
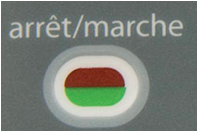
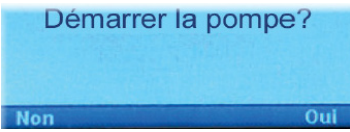
MÉTHODE PAR POMPE CADD SOLIS VIP

FICHE D'ENSEIGNEMENT D'ANTIBIOTHÉRAPIE INTRAVEINEUSE AMBULATOIRE

Pour mieux vous guider

Changement des piles (4 piles AA) aux _____ jours

Durant toute la durée de votre traitement, vous devrez changer les piles de votre pompe et savoir quoi faire si cette dernière émet une alarme. Les deux sections suivantes présentent ces étapes.

Avant de changer les piles, assurez-vous d'arrêter la pompe en appuyant sur la touche arrêt/marche .	
Arrêt pompe ? Choisir OUI.	
Appuyer sur le bouton du côté de la pompe pour éteindre l'appareil Éteindre ? Choisir OUI.	
Ouvrir la porte du compartiment des piles en tournant le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.	
- Retirer les anciennes piles et insérer les 4 nouvelles. Assurez-vous que les signes + et – des piles correspondent à ceux indiqués sur la pompe. - Fermer la porte du compartiment et tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller.	
Appuyer sur le bouton apparaissant sur le côté de la pompe pour l'allumer.	
Redémarrer la pompe en appuyant sur la touche arrêt/marche.	
Démarrer la pompe ? Choisir OUI.	

Notes personnelles

MÉTHODE PAR POMPE CADD SOLIS VIP

FICHE D'ENSEIGNEMENT D'ANTIBIOTHÉRAPIE INTRAVEINEUSE AMBULATOIRE

Pour mieux vous guider

Changement du sac d'antibiotique

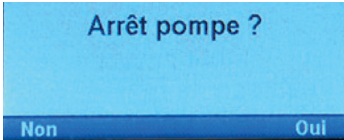
Propreté de la surface de travail	
	• Attacher vos cheveux avant de débiter. • Choisir un endroit propre et calme où vous ne serez pas dérangé. • S'assurer qu'il n'y a pas d'animaux dans la pièce. • Laver la surface de travail avec de l'eau, du savon et un linge propre. Rincer à l'eau claire et assécher. • Éviter que les enfants touchent la surface.
Propreté des mains	
ATTENTION ! Il est important de ne pas parler, souffler ou tousser en direction du matériel qui est sur la table de travail. Vous ne devez pas toucher la fiche perforante avec vos doigts lorsque vous effectuez le changement de sac d'antibiotique.	• La personne qui donne l'antibiotique doit toujours se laver les mains avant de toucher le matériel. - <i>Relaver vos mains si vous touchez à autre chose.</i> • Pour se laver les mains : - <i>Savonner et frotter pendant 30 secondes;</i> - <i>Rincer puis sécher à l'aide d'une serviette propre.</i>
Matériel requis pour le changement de sac d'antibiotique (retrait du sac vide et installation du nouveau)	
	• Pompe CADD Solis VIP. • Sac contenant l'antibiotique.
Préparation	
ATTENTION ! Vous n'avez pas à changer la tubulure, c'est l'infirmière du CLSC ou de l'hôpital qui le fera lors des visites.	• Vérifier le site de votre cathéter (si rougeur, chaleur ou sensibilité le long de la veine, vous référer à la section Points de surveillance). • Sortir le sac d'antibiotique du réfrigérateur avant l'administration. • Vérifier que l'aspect de l'antibiotique est conforme. • Vérifier si l'inscription sur l'antibiotique est exacte : - <i>Votre nom, le nom de votre antibiotique et la date d'expiration.</i>

Notes personnelles

MÉTHODE PAR POMPE CADD SOLIS VIP

FICHE D'ENSEIGNEMENT D'ANTIBIOTHÉRAPIE INTRAVEINEUSE AMBULATOIRE

Pour mieux vous guider

1. Assurez-vous de fermer la pompe en appuyant sur la touche arrêt/marche.	
• Arrêt pompe ? Choisir OUI.	
• Assurez-vous de fermer la pince de la tubulure.	
2. Préparer le nouveau sac d'antibiotique. • Prendre le nouveau sac d'antibiotique. • Tenir fermement, entre le pouce et l'index, la jonction située entre le sac et l'embout se terminant par un capuchon blanc (ou bleu). • Enlever le capuchon blanc (ou bleu) du sac en tirant fortement. Déposer le sac sur la table de façon à ce que l'embout destiné à recevoir la tubulure ne touche à rien (soit dans le vide)	
3. Retirer le sac vide. • Tenir fermement entre le pouce et l'index la partie de la tubulure située près de la fiche perforante. • À l'aide de l'autre main, tenir fermement le sac d'antibiotique vide par l'extrémité où se situe les embouts. • Retirer la fiche perforante du sac vide. • Jeter le sac vide dans la poubelle.	
4. Connecter la tubulure au nouveau sac d'antibiotique. • Entrer profondément la fiche perforante dans l'embout du nouveau sac d'antibiotique (où était situé le capuchon blanc ou bleu). • Enfoncer la fiche perforante jusqu'au 3/4 environ (partie où elle s'élargit). ATTENTION! N'enfoncez pas la fiche perforante jusqu'au bout, car vous pourriez endommager le sac d'antibiotique.	
5. Réinitialiser le volume résiduel. • Dans le menu Tâches : - Appuyer sur Sélect pour sélectionner <i>Réinitialiser volume résiduel</i> (la première tâche); - Choisir OUI (le volume préenregistré est déjà adéquat). L'écran de la pompe affichera « <i>Enreg...</i> ».	
6. Débuter la perfusion. • Ouvrir la pince de la tubulure. • Appuyer sur la touche arrêt/marche : - <i>Démarrer la pompe ?</i> Choisir OUI.	

MÉTHODE PAR POMPE CADD SOLIS VIP

FICHE D'ENSEIGNEMENT D'ANTIBIOTHÉRAPIE INTRAVEINEUSE AMBULATOIRE

Pour mieux vous guider

Gestion des alarmes de la pompe

Alarme / Message	Description	Quoi faire?
Démarrage de la pompe impossible avec volume résiduel à zéro.	Le volume d'antibiotique restant, inscrit sur l'écran de la pompe, est à zéro.	Supprimer l'alarme : • Choisir Accepter en appuyant sur les flèches; • Changer le sac d'antibiotique (si ce n'est pas déjà fait); • Suivre les étapes pour réinitialiser le volume résiduel; • Redémarrer la pompe.
Occlusion en amont. Éliminer l'occlusion entre la pompe et le réservoir.	Le liquide ne s'écoule pas du sac d'antibiotique à la pompe, car elle détecte un blocage. La perfusion est en pause et reprendra dès que la situation sera corrigée	Supprimer l'alarme : • Choisir Accepter en appuyant sur les flèches; • S'assurer que la tubulure n'est pas pliée ou pincée.
Occlusion en aval. Éliminer l'occlusion entre la pompe et le patient.	Le liquide ne s'écoule pas de la pompe à votre cathéter, car la pompe détecte un blocage. La perfusion est en pause et reprendra dès que la situation sera corrigée.	Supprimer l'alarme : • Choisir Accepter en appuyant sur les flèches; • S'assurer que la tubulure entre la pompe et votre cathéter n'est pas pliée ou pincée; • Détendre le bras et l'allonger.
Pile vide, la pompe ne fonctionne pas.	La puissance des piles est trop faible pour faire fonctionner la pompe.	• Arrêter la pompe; • Retirer les piles et en installer de nouvelles (voir section <i>Changement des piles</i>); • Redémarrer la pompe.
Pile vide, pompe à l'arrêt.	La pompe s'est arrêtée en cours de perfusion puisque la puissance des piles est trop faible pour la faire fonctionner.	• Arrêter la pompe; • Retirer les piles et en installer de nouvelles (voir section <i>Changement des piles</i>); • Redémarrer la pompe.
Volume résiduel égal à zéro, pompe à l'arrêt.	Le volume d'antibiotique restant, inscrit sur l'écran de la pompe, est à zéro. La pompe s'est arrêtée en cours de perfusion puisqu'il n'y a plus de contenu (antibiotique) dans le sac.	Supprimer l'alarme : • Choisir Accepter en appuyant sur les flèches; • Changer le sac d'antibiotique (si ce n'est pas déjà fait); • Suivre l'étape 5 Réinitialiser le volume résiduel (voir page 4); • Redémarrer la pompe.
Volume résiduel bas.	Le contenu du sac d'antibiotique sera bientôt terminé.	Supprimer l'alarme : • Choisir Accepter en appuyant sur les flèches; • Changer le sac d'antibiotique (si ce n'est pas déjà fait); • Suivre l'étape 5 Réinitialiser le volume résiduel (voir page 4); • Redémarrer la pompe.
En tout temps, si l'alarme se poursuit, contacter l'infirmière du CLSC ou le service 24/7*		

Pour mieux vous guider

Le tableau suivant présente quelques **points de surveillance** ainsi que les **interventions requises**. Pour toutes questions supplémentaires, adressez-vous à l’infirmière du CLSC ou à votre pharmacien (s’il s’agit d’interrogations reliées à votre antibiotique).

Points de surveillance	Quoi faire?
Rougeur, chaleur ou sensibilité le long de la veine	• Contacter l'infirmière du CLSC ou le service 24/7*
Présence de fièvre, frissons	• Contacter l'infirmière du CLSC ou le service 24/7* (pour valider la nécessité de consulter)
Retrait accidentel du cathéter (partiel ou total)	• Ne pas tenter de le repousser dans votre bras • Si saignement, comprimer le site • Contacter l'infirmière du CLSC ou le service 24/7*
Si décollement du pansement	• Contacter l'infirmière du CLSC ou le service 24/7*
Si écoulement au site du cathéter	• Contacter l'infirmière du CLSC ou le service 24/7*
Si votre pansement est mouillé	• Contacter l'infirmière du CLSC ou le service 24/7*

[illegible]

Infirmière à joindre en cas de problème

☐ CLSC ou ☐ médecine de jour: _____

Téléphone : _____

Nom de l'infirmière : _____

En dehors des heures d'ouverture du CLSC
ou de la médecine de jour, contacter le service 24/7 :

Ce guide fournit des recommandations conformes aux informations scientifiques disponibles au moment de sa publication, soit en mars 2022. Toutefois, ces recommandations n'ont aucunement pour effet de remplacer le jugement d'un clinicien. Le CISSS de la Montérégie-Ouest se dégage de toute responsabilité reliée à une mauvaise utilisation de l'information contenue dans ce document.

Ce document est inspiré du document produit par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et le CHU de Québec – Université Laval.

Maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population québécoise en rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux intégrés et de qualité, contribuant ainsi au développement social et économique du Québec.

Des soins de santé et des services accessibles et efficaces qui s'adaptent aux besoins des Québécois.

Le CISSS de la Montérégie-Ouest réalise ses ambitions en osant innover dans ses façons de faire et ainsi il se démarque et rayonne par :

- L'excellence de son offre de soins et services intégrés de proximité axée sur l'interdisciplinarité, l'accessibilité et l'adaptation aux besoins de sa population;
- Son courage à questionner et à améliorer ses pratiques professionnelles, cliniques et de gestion;
- La reconnaissance de la contribution de son personnel et la mise en place de pratiques de gestion humaines;
- La force de ses liens avec ses partenaires.

Nos actions sont guidées par cinq valeurs, interdépendantes et en équilibre: bienveillance, collaboration, engagement, audace et cohérence.