

Guide de référence du produit

Système de perfusion ambulatoire CADD-Solis VIP[MC]

Écrans d'aide des alarmes


Lorsque certaines alarmes se déclenchent, des informations supplémentaires peuvent être affichées. Les écrans d'aide décrivent les mesures à prendre pour tenter de résoudre le problème qui a provoqué l'alarme.

Étapes:


1. Lorsqu'une alarme est déclenchée, appuyez sur Silence pour la désactiver.
2. Si des écrans d'aide sont disponibles pour l'alarme, l'indication « Aide » apparaît au-dessus de la touche programmable de droite. Pour afficher les écrans d'aide, sélectionnez Aide.
3. Suivez les instructions qui figurent dans l'écran d'aide. Pour passer en revue tous les écrans d'aide disponibles, appuyez à plusieurs reprises sur Suivant. Appuyez sur Accepter à tout moment pour quitter l'aide.
4. « Réessayer aide » apparaît si aucune étape d'aide supplémentaire n'est disponible. Pour passer à nouveau en revue les écrans d'aide, appuyez sur Réessayer aide. L'écran Alarme réapparaît comme dans l'étape 2 ci-dessus. Répétez les étapes 2 et 3. Lorsque l'alarme est effacée, les écrans d'aide ne s'affichent plus.

Des écrans d'aide sont associés aux alarmes suivantes. Reportez-vous aux étapes ci-dessus pour naviguer dans les écrans d'aide.

Démarrage pompe impos. sans cassette raccordée et verrouillée.

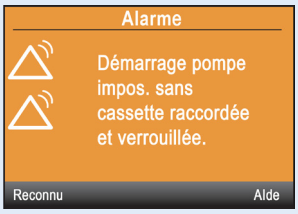



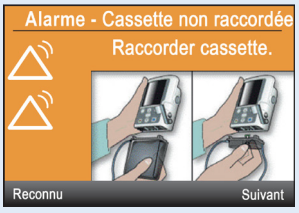





Occlusion en amont. Éliminer l'occlusion entre la pompe et le réservoir.





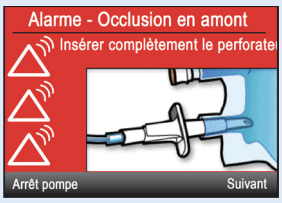

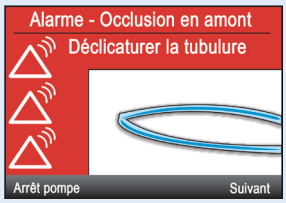





icumedical
human connections



Guide de référence du produit
Système de perfusion ambulatoire CADD-Solis VIP[MC]
Écrans d'aide des alarmes

The Des écrans d'aide sont associés aux alarmes suivantes. Reportez-vous aux étapes ci-dessus pour naviguer dans les écrans d'aide.

Occlusion en aval. Éliminer l'occlusion entre la pompe et le patient.














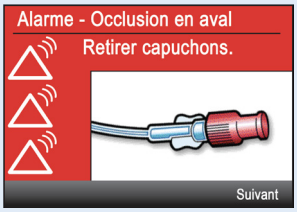




Démarrage pompe impos. sans cassette raccordée et verrouillée

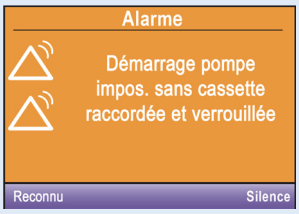


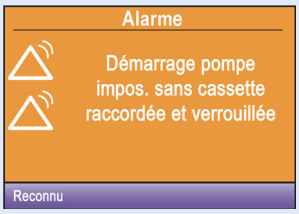


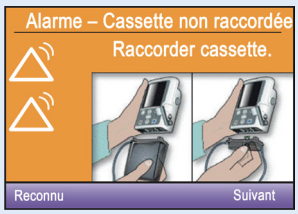



Verr. cassette pr démarrer pompe. (Mode PCA uniquement)

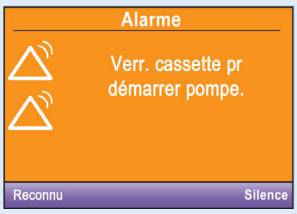

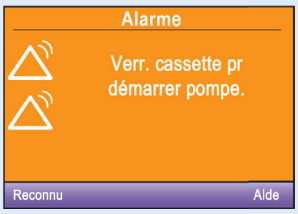





Sur ordonnance seulement. Pour une utilisation sécuritaire et adéquate, veuillez consulter le manuel, le guide ou le mode d'emploi appropriés. Les illustrations d'écran sont des représentations graphiques qui ressemblent à l'affichage réel de l'écran.

icumedical
human connections

800.824.7890 | www.icumed.com