



# Système de perfusion CADD-Solis[MC]
# Pompe ambulatoire CADD-Solis VIP[MC]
## Mode Intermittent

## Nouvelle programmation

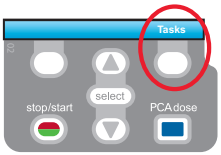



1. Pour lancer la programmation, sélectionner Tâches.

2. Utiliser la flèche ▼, mettre en surbrillance Lancer une nouvelle programmation + sélect, puis sélectionner Continuer.

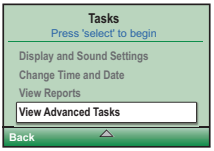



3. En utilisant la flèche ▼ mettre en surbrillance Lancer une nouvelle programmation + sélect, puis sélectionner Continuer.

4. Entrer le code de sécurité à 3 chiffres en utilisant la flèche ▼ ou ▲ + sélect.

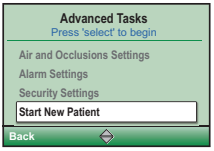



5. En utilisant la flèche ▼ ou ▲, mettre en surbrillance Intermittent + sélect. Mettre en surbrillance [Program. manuelle] ou le critère qualificatif du protocole s'il existe + sélect. Si le protocole est choisi, mettre en surbrillance le nom du médicament + sélect.

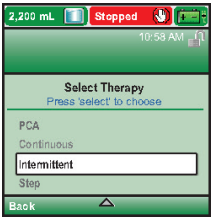


6. Sélectionner Oui pour confirmer le choix. Sélectionner Revior pour revoir les paramètres de la pompe.

7. Ensuite, ajuster chaque paramètre. Mettre en surbrillance un paramètre, appuyer sur sélect, puis sur la flèche ▼ ou ▲. Sélectionner Enregistrer.

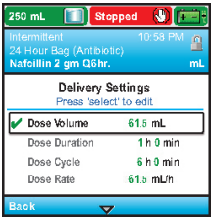


**Volume de dose:** volume de la dose à perfuser
**Durée de dose:** durée nécessaire pour perfuser une dose
**Cycle de dose:** durée entre le début d'une dose et le début de la dose suivante
**Dose suivante:** indique l'heure à laquelle la prochaine dose va débuter

8. Confirmer les valeurs en sélectionnant Valider. Le symbole ✓ apparaît à gauche + Suivant.

9. Retirer la pince bleue et fixer la tubulure de perfusion ou la cassette. Les prochaines étapes à suivre jusqu'au démarrage de la pompe apparaîtront à l'écran.

10. Démarrer la pompe.

icumedical
human connections

©2023 ICU Medical, Inc. I CA-FR-ED04-0248-0223 I Pour diffusion

800.824.7890 | www.icumed.com

## Changement rapide de consommable

### Même volume à perfuser, même programmation




1. Mettre la pompe sous tension.
2. Retirer la pince bleue et fixer le nouveau consommable à la pompe.
3. La pompe demande Réinitialiser volume résiduel à xx mL?
   Valider en sélectionnant OUI.
4. L'écran affiche Purger la tubulure?
   Sélectionner OUI (si nécessaire). Sélectionner Non si la tubulure a été purgée au préalable.
5. Entrer le code de sécurité à 3 chiffres. Appuyer sur la flèche ▼ ou ▲ + sélect si nécessaire.
6. Suivre les instructions pour purger la tubulure.
7. Démarrer la pompe.

Sur ordonnance seulement. Pour une utilisation sécuritaire et adéquate, veuillez consulter le manuel, le guide ou le mode d'emploi appropriés. Les illustrations d'écran sont des représentations graphiques qui ressemblent à l'affichage réel de l'écran.

©2023 ICU Medical, Inc. I CA-FR-ED04-0248-0223 I Pour diffusion

icumedical
human connections

800.824.7890 | www.icumed.com