


Note de service

DESTINATAIRES :	Tous les gestionnaires cliniques, conseillères en soins infirmiers, personnel infirmier, gestion de l'approvisionnement de l'hôpital du Suroît
EXPÉDITEUR :	Élyse Bériault, conseillère en soins infirmiers – volet opération Geneviève Benoît, conseillère cadre spécialisée – soins généraux Roxanne Forgues, conseillère en soins infirmiers – évaluation et harmonisation des produits, DSIEU
DATE :	2023-03-13
OBJET :	Nouveau produit – Filtre 1,2 micron pour administration de la nutrition parentérale (HAIV)


Afin d'harmoniser la pratique et d'adopter une pratique exemplaire, un nouveau produit sera déployé dans vos secteurs concernant la filtration de la nutrition parentérale (HAIV) lors de son administration. Selon les lignes directrices recommandées, les acides aminés et les lipides devraient être administrés à l'aide d'un filtre 1,2 micron afin d'éviter l'administration de particules pouvant causer préjudice à l'usager (infection, problèmes pulmonaires, etc). Une tubulure de rallonge munie d'un filtre 1,2 micron devra désormais être utilisée pour **l'administration des acides aminés ET des lipides**

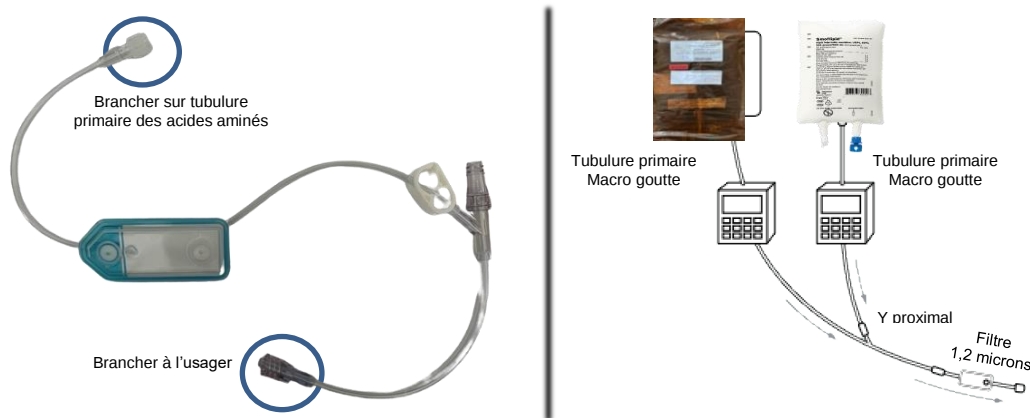

À cet effet, l'utilisation de la tubulure avec filtre 0,22 micron, tel qu'utilisé actuellement, est à proscrire pour l'administration de l'HAIV. Toutefois le filtre 0,22 micron restera disponible sur les unités de soins, dans les chariots haute densité, mais sera dorénavant réservé pour l'administration d'autres médicaments nécessitant ce type de filtre (ex : Dilantin). Tout autre tubulure / filtre utilisé antérieurement pour l'administration des lipides devra être remplacé par le nouveau filtre 1,2 micron

Le montage devra être effectué en respectant les éléments suivants :

1. Brancher une tubulure primaire macrogoutte à la solution d'acides aminés.
2. Au bout de la tubulure primaire de la solution d'acides aminés, brancher la rallonge de tubulure contenant le filtre 1,2 micron et effectuer le vide d'air de la tubulure et de la rallonge avec la solution d'acides aminés.
3. Brancher une tubulure primaire macrogoutte à la solution lipidique et effectuer le vide d'air
4. Brancher la solution lipidique dans le Y proximal de la tubulure primaire de la solution d'acides aminés
5. Bien important de brancher la solution lipidique avant le filtre 1,2 micron. Ne jamais brancher les lipides dans le « Y » suivant le filtre puisque sinon, ceux-ci ne seront pas filtrés.
6. Brancher à l'usager

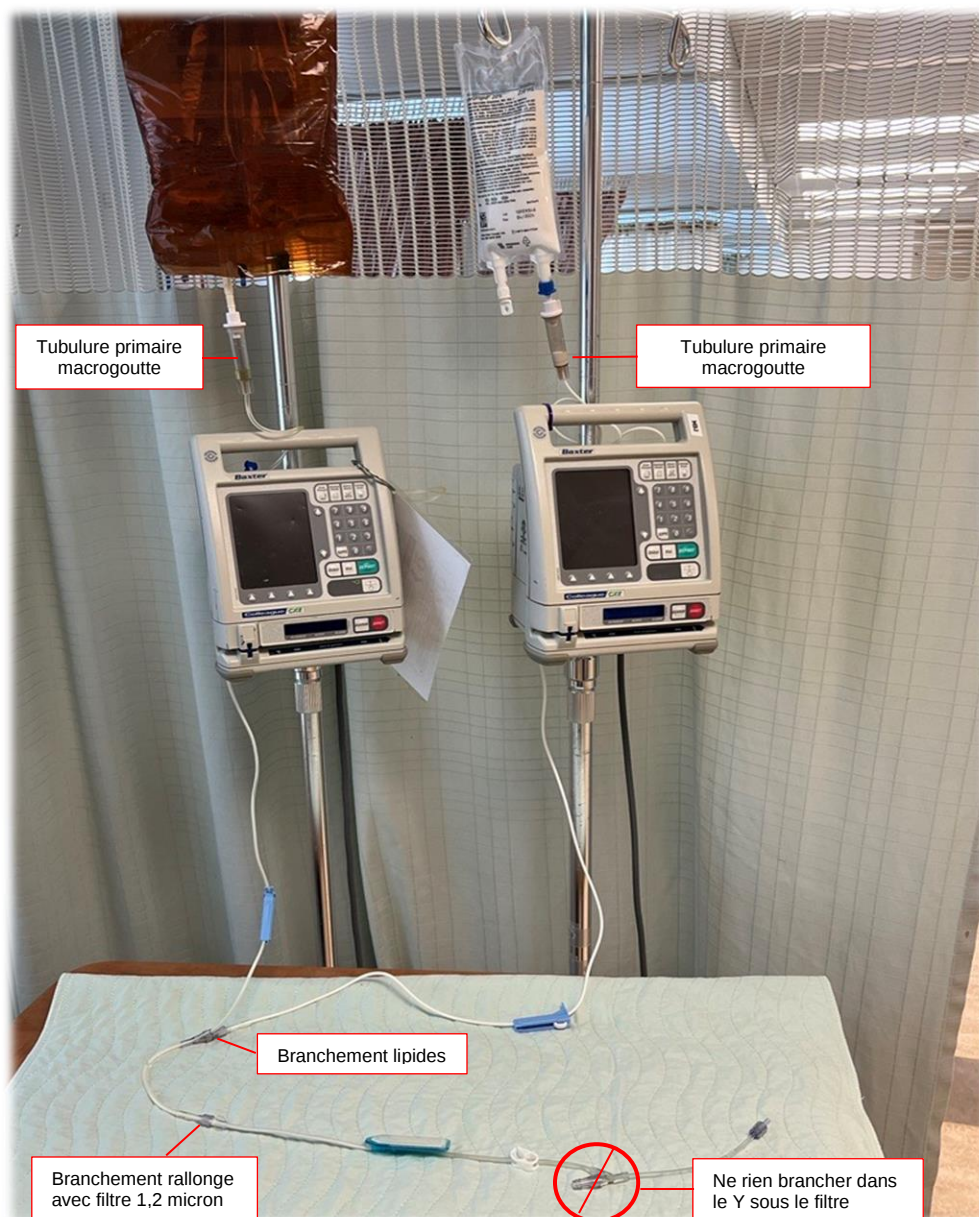

MODALITÉS D'APPROVISIONNEMENT

Aucune commande auprès du magasin ne sera nécessaire afin d'obtenir le produit. Le produit sera rendu disponible dans tous les chariots haute densité sur chaque unité de soins.

PORTEUR DE DOSSIER

Toute question en lien avec l'utilisation du produit peut être adressée au porteur de dossier suivant :

Élyse Bériault, conseillère en soins infirmiers
 450-371-9920 poste 2915 ou 579-491-2572
elyse.beriault.ciassmo16@ssss.gouv.qc.ca