



Montage du matériel pour la préoxygénation (Alternative 1 et 2)

En priorité, il est recommandé de réaliser la préoxygénation **FiO₂ 100% (Ventimask réservoir)** pour 5 minutes. Si impossible, voici les alternatives à privilégier.

ALTERNATIVE 1

Lunette nasale et masque VNI non-ventilé (à privilégier)

1. Connecter le filtre viral au masque de VNI non-ventilé
2. Installer la lunette nasale sur l'utilisateur à 15 L/min
3. Installer le masque VNI sur la lunette nasale et le visage de l'utilisateur
4. Raccorder le masque VNI au ballon muni d'une valve de PEEP
5. Raccorder le ballon-masque à l'oxygène au mur à « flush »
6. **Ne PAS ventiler** avec le ballon-masque
7. Considérer de fermer la lunette nasale au moment de la laryngoscopie

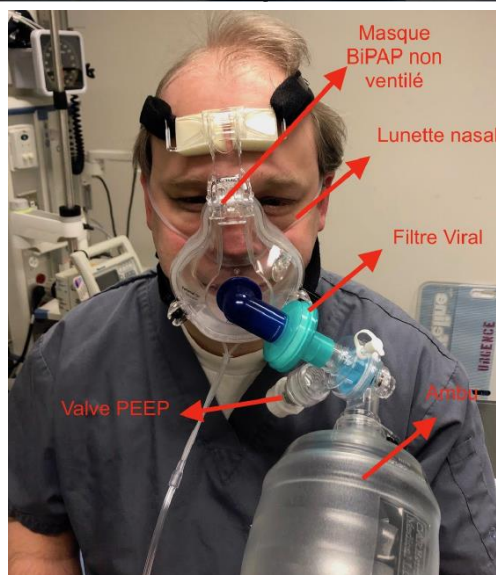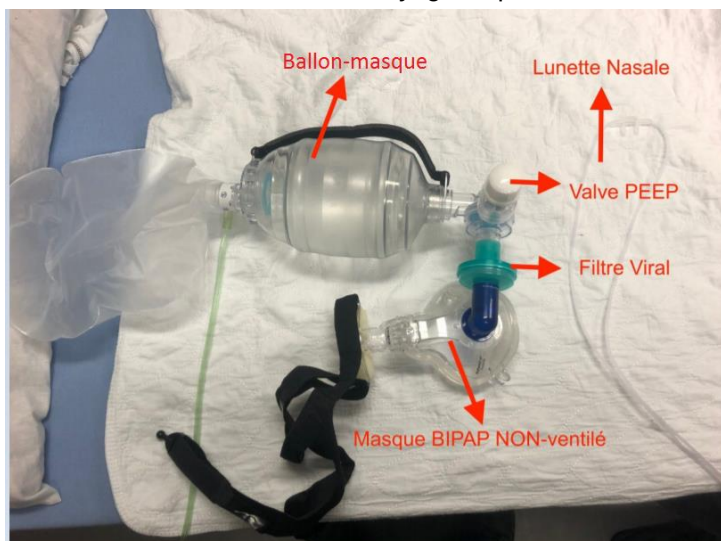



(Hôpital Charles-Lemoyne, 2020)

ALTERNATIVE 2

Ballon-masque + Lunette nasale

(si masque VNI non-ventilé est non-disponible)

1. Connecter le filtre viral au masque muni d'une valve de PEEP
2. Installer la lunette nasale sur l'utilisateur à 15 L/min
3. Appuyer fermement le masque sur la lunette nasale et le visage de l'utilisateur en tentant d'éviter les fuites
4. Raccorder le masque au ballon muni d'une valve de PEEP
5. Raccorder le ballon-masque à l'oxygène au mur à "flush"
6. **Ne PAS ventiler** avec le ballon-masque
7. Considérer de fermer la lunette nasale au moment de la laryngoscopie

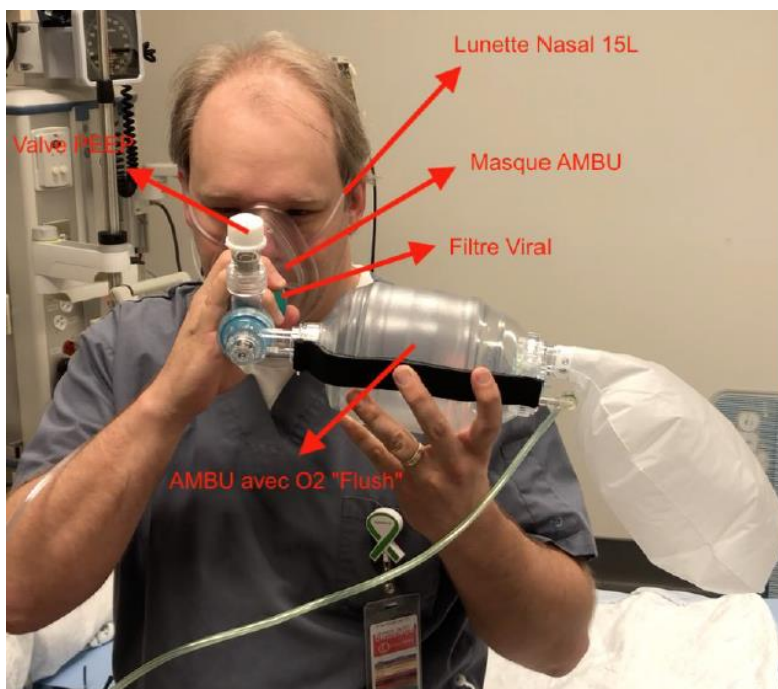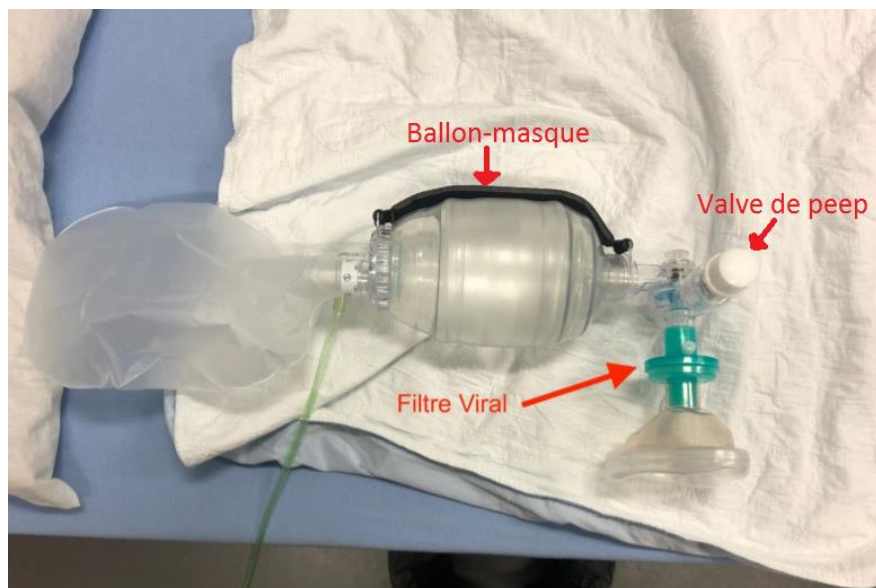

Hôpital Charles-Lemoyne, 2020