Pompe Infusomat® SPACE

Processus de téléchargement de la bibliothèque de médicaments par un réseau sans fil

REMARQUE IMPORTANTE: Veillez bien à ce que toutes les pompes et tous les modules SpaceStation soient connectés à une source d'énergie AVANT une mise à jour programmée de la bibliothèque de médicaments via le réseau sans fil.



1. Un symbole de fichier clignotera en alterance avec le symbole d'antenne sans fil lorsqu'un nouveau fichier de bibliothèque de médicaments sera disponible. Arrêtez la perfusion lorsque l'état du patient le permet. **Mettez la pompe hors tension pour commencer le téléchargement de la bibliothèque de médicaments.** Attendez 10 secondes pour que l'écran de la barre de progression (ci-dessous) s'affiche. Notez ce qui suit:

- La pompe doit être branchée à une source d'alimentation en c.a. (par le cordon d'alimentation ou le module Space Station)
- Les pompes qui reçoivent un fichier de mise à jour pendant qu'elles sont dans le module SpaceStation doivent être mises hors tension et rester dans le module « SpaceStation » jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée.



2. La barre de progression indique que le téléchargement est en cours. **Laissez le téléchargement se terminer.**
NOTE: *La durée du téléchargement de fichiers dépend de la taille de la bibliothèque. Le téléchargement de fichiers volumineux peut prendre plus de 30 minutes. Ne retirez pas la pompe du module SpaceStation pendant que le téléchargement est en cours.*

REMARQUE: Si vous devez annuler la mise à jour, veuillez suivre ces directives.



3. L'affichage indique que **la mise à jour de la bibliothèque de médicaments est réussie.** Appuyez sur OK pour confirmer. La pompe sera mise hors tension. Lorsque la pompe sera de nouveau mise sous tension, l'écran de confirmation ci-dessous s'affichera.

4. Appuyez sur OK pour confirmer que la nouvelle bibliothèque a été activée sur la pompe.



5. Appuyez sur OK pour confirmer. La pompe retourne à la page d'accueil de B. Braun et est maintenant prête pour la programmation d'une nouvelle perfusion.

Date prévue du téléchargement automatique de la bibliothèque par réseau sans fil:

⚠ Attention: N'ANNULEZ PAS le téléchargement

Annulation d'un téléchargement d'une bibliothèque de médicaments

Nous vous recommandons vivement de ne **PAS** annuler un téléchargement en cours d'une bibliothèque de médicaments. Vous supprimeriez alors **TOUS** les fichiers de bibliothèque de médicaments, et la pompe n'aurait plus AUCUNE limite de sécurité.

Annulation du processus (non recommandée)




Appuyez sur la touche « C » pour annuler la mise à jour.



Appuyez sur la touche « OK » pour confirmer le message.



Appuyez pour confirmer que vous souhaitez annuler la mise à jour.

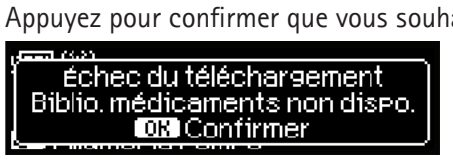

L'affichage indique que la mise à jour de la bibliothèque de médicaments a **ÉCHOUÉ** et que la pompe n'a plus de bibliothèque de médicaments ni de limites de sécurité. Appuyez sur OK pour confirmer. La pompe sera mise hors tension. Lorsque la pompe sera de nouveau mise sous tension, l'écran de confirmation ci-dessous s'affichera.






La pompe n'a plus de bibliothèque de médicaments ni de limites de sécurité. Appuyez sur OK pour confirmer les messages. La pompe retournera à la page d'accueil de B. Braun. Seules les perfusions de base (aucune limite de la base de données) peuvent être programmées.

Si le téléchargement de la bibliothèque de médicaments est annulé, communiquez avec votre service de Génie biomédical pour obtenir de l'aide. Une nouvelle bibliothèque de médicaments doit être téléchargée dans la pompe.

Confirmation du statut à jour de la bibliothèque de médicaments sur la pompe

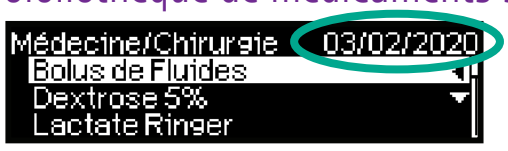

Naviguez dans la bibliothèque de médicaments et confirmez que la date indiquée dans la coin supérieur droit est la date de médicaments la plus récente. Cette date représente la date de création de la bibliothèque de médicaments.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez communiquer avec le service d'assistance 24 heures sur 24 pour les systèmes de perfusion de b. Braun au 1 800 627 7867 ou à AISTechSupport.US@BBraun.com.

Rx Uniquement. ©2017 B. Braun Medical Inc., Bethlehem, PA. Tous droits réservés. IS244_0817