

PROTECTEUR CUTANÉ		- Est un agent scellant transparent. - Contient de l'alcool, des copolymères, gelés de pétrole et diméthicone	
Noms commerciaux (exemples)	Objectifs et indications	Contre-indications	Application et particularités
Avec alcool - Skin Prep Sans alcool - NoSting SkinPrep - Cavilon Crème - Critic-Aid Clear 	- Augmenter l'adhérence d'un pansement - Protéger la peau environnante - Protéger la peau en présence d'incontinence urinaire ou fécale sans perte d'épiderme Appliquer sur une peau saine et sèche. Pour les peaux lésées : utiliser un protecteur cutané liquide sans alcool. Tous les protecteurs cutanés liquides peuvent être utilisés pour protéger la peau environnante lors d'un traitement par pression négative.		Exige peu d'applications (souvent tous les 2-3 jours selon la quantité d'exsudat) : - Tampon : appliquer au pourtour de la plaie et laisser sécher; - Vaporisateur : appliquer au pourtour de la plaie (éviter d'en appliquer dans la plaie) et laisser sécher. - Crème : étendre sur les gants pour faciliter l'application Trucs Espacer les applications si la peau devient sèche

HYDROGEL		- Hydrate et donne de l'humidité au lit de la plaie. - Composition : Eau (70%); Alginate de sodium (3%), propylène glycol	
Noms commerciaux (exemples)	Objectifs et indications	Contre-indications	Application et particularités
	- Débridement autolytique - Milieu humide contrôlé Plaie superficielle ou profonde, exsudat léger ou nul	- Plaie sans potentiel de cicatrisation - Plaie avec cavité non accessible, sinus étroit ou avec tissu : - épithélial - hypergranulation - Exsudat modéré ou fort Escarre sèche au talon - Plaie présentant des signes d'infection, car n'a pas de propriétés antimicrobiennes	Pansement primaire nécessitant un pansement secondaire : 3 à 5 mm d'épaisseur ou combler l'espace mort avec une mèche; - risque de macération : protéger la peau environnante au besoin; - ne pas faire dépasser sur la peau environnante (sauf tulle d'hydrogel à base de glycérine); - éviter de chevaucher les compresses. Trucs La scarification peut s'avérer nécessaire pour les plaies présentant une escarre.

PANSEMENT PÂTE HYDROPHILE		- Maintien un milieu humide, mais n'a pas la fonction d'hydrater la plaie. - Composé d'oxyde de zinc, de poudre hydrophile, de gelée de pétrole d'huile minérale et diméthicone	
Noms commerciaux (exemples)	Objectifs et indications	Contre-indications	Application et particularités
<i>Triad</i> 	Adhérer aux régions humides et aux muqueuses difficiles à panser - Comblent l'espace mort - Débridement autolytique Milieu humide contrôlé Plaie superficielle ou profonde, avec exsudat léger à modéré	- Plaie sans potentiel cicatrisation - Exsudat fort - Plaie présentant des signes d'infection, car n'a pas de propriétés antimicrobiennes Incompatibilité argent	Pansement primaire (ne nécessite habituellement pas de pansement secondaire, mais il est possible de recouvrir la pâte avec une compresse.) Trucs - Si la pâte adhère au lit de la plaie au retrait, appliquer une compresse imbibée de solution saline pendant 15 à 20 minutes, puis retirer. - Entre les changements de pansements, nettoyer la pâte souillée (ne pas retirer la pâte non souillée dans la plaie) et appliquer une nouvelle couche de pâte. Ce pansement n'est pas une barrière cutanée. Le produit est stérile si conserver dans le contenant original ou transvider un contenant stérile.

**PANSEMENT NON ADHÉRENT
NON IMPRÉGNÉ**

- Permet d'absorber de légère quantité d'exsudat sans adhérer au lit de la plaie.
- Composé de toile de nylon, de coton ou d'acrylique recouvert d'une pellicule perforée composée de polyester ou autre.

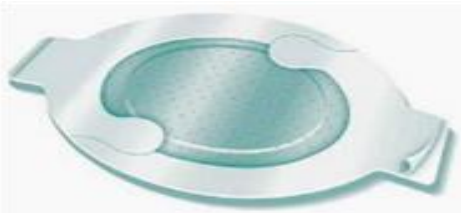
Noms commerciaux (exemples)	Objectifs et indications	Contre-indications	Application et particularités
Telfa 	• Prévenir ou soulager la douleur • Protéger le lit de la plaie Plaie superficielle, exsudat nul à léger	• Plaie sans potentiel de cicatrisation • Plaie profonde ou avec : - exsudat visqueux - sinus, tunnel et sous-minage • Exsudat modéré à fort (car non absorbant) • Plaie présentant des signes d'infection, car n'a pas de propriétés antimicrobiennes	Pansement primaire ou secondaire : • peut être taillé; • doit dépasser d'au moins 2,5 cm le pourtour de la plaie. Trucs • Si adhère à la plaie au retrait : réévaluer et opter pour un autre type de pansement. • Si macération : augmenter la fréquence des changements de pansements ou choisir un pansement plus absorbant.

PANSEMENT NON ADHÉRENT IMPRÉGNÉ NON MÉDICAMENTÉ		• Permet de protéger le lit de la plaie des traumatismes lors des changements de pansements. N'a pas la fonction d'ajouter de l'humidité dans le lit de la plaie, mais peut maintenir un certain niveau d'humidité. • Peut contenir de la viscosité, être tissé ou perforé, imprégné de différentes substances telles que la paraffine, la gelée de pétrole ou la silicone.	
Noms commerciaux (exemples)	Objectifs et indications	Contre-indications	Application et particularités
À base de gelée de pétrole • Adaptic • À base de silicone • Adaptic touch 	• Protéger le lit de la plaie • Prévenir ou soulager la douleur Plaie superficielle ou profonde, exsudat nul à fort	• Plaie avec cavité non accessible, sinus et tunnel • Exsudat visqueux Plaie présentant des signes d'infection, car n'a pas de propriétés antimicrobiennes	Pansement primaire nécessitant un pansement secondaire : • peut être taillé; • peut dépasser du lit de la plaie, sauf si macération. Trucs Certains pansements non adhérents (à base de silicone) peuvent rester en place jusqu'à 7 jours, tandis que le pansement secondaire sera changé au besoin.

PANSEMENT HYDROCOLLOÏDE	- Se transforme en substance gélatineuse au contact de l'exsudat, créant et maintenant un milieu humide contrôlé et réduisant le pH local. L'adhésivité se retrouve au niveau de la peau saine uniquement. - Contient des agents gélifiants (carboxyméthylcellulose, gélatine, pectine), des élastomères, des polymères et de l'adhésif et est recouvert d'une couche mince de polyuréthane.		
Noms commerciaux (exemples)	Objectifs et indications	Contre-indications	Application et particularités
DuoDERM Extra - Mince Comfeel Plus 	- Débridement autolytique Milieu humide contrôlé - Prévenir la contamination - Protéger la peau environnante - Protéger le lit de la plaie Plaie superficielle, exsudat nul à léger	- Plaie sans potentiel de cicatrisation - Plaie avec exsudat modéré à fort - Plaie présentant des signes d'infection, car n'a pas de propriétés antimicrobiennes À utiliser avec précaution chez les usagers présentant une peau fragile (risque de causer des déchirures cutanées au retrait)	Pansement primaire ou secondaire : - Peut être taillé; - doit dépasser d'au moins 2,5 cm le pourtour de la plaie; - possibilité d'odeur au retrait en raison des composants du produit. Ne pas confondre avec une infection. Trucs - Peau fragile : ajouter, au préalable, un protecteur cutané liquide sur la peau environnante ou opter pour un autre type de pansement. - Il est recommandé de réévaluer le type de pansement si la fréquence des changements de pansements est supérieure à 2 fois/semaine. L'usager peut prendre sa douche avec ce type de pansement, puisqu'il est imperméable.

PELLICULE TRANSPARENTE	• Crée un environnement semi-occlusif permettant de l'utiliser dans diverses situations pour divers objectifs de soin. • Composé de polyuréthane enduit d'un adhésif acrylique transparent.
-------------------------------	--

Noms commerciaux (exemples)	Objectifs et indications	Contre-indications	Application et particularités
Tegaderm Op-site 	• Débridement autolytique • Maintenir ou renforcer l'adhérence d'un pansement primaire (tout en le gardant semi-occlusif) • Milieu humide contrôlé • Prévenir la contamination • Protéger la peau environnante • Réduire la friction (pour les régions à risque de lésions de pression) Plaie superficielle avec exsudat nul	• Plaie sans potentiel de cicatrisation • Exsudat modéré à fort (aucune propriété d'absorption) • Plaie présentant des signes d'infection, car n'a pas de propriétés antimicrobiennes	Pansement primaire ou secondaire : • peut être taillé; • doit dépasser d'au moins 2,5 cm le pourtour de la plaie. Trucs • Peau fragile : l'utilisation d'un protecteur cutané liquide sous la pellicule transparente est conseillée au préalable. • Au retrait, tirer délicatement en exerçant une traction parallèle à la peau afin d'éviter une déchirure cutanée. • Ne pas l'étirer ou faire de traction lors de l'application. • L'utilisateur peut prendre sa douche avec ce type de pansement, puisqu'il est imperméable.

PANSEMENT ABSORBANT ACRYLIQUE	• Crée un environnement semi-occlusif permettant de l'utiliser dans diverses situations pour divers objectifs de soin. • Composé de polyuréthane enduit d'un adhésif acrylique transparent		
Noms commerciaux (exemples)	Objectifs et indications	Contre-indications	Application et particularités
Pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm  	• Débridement autolytique • Milieu humide contrôlé • Observer la plaie sans retirer le pansement • Protéger le lit de la plaie • Prévenir la contamination Plaie superficielle avec exsudat nul à léger Peut rester en place 28 jours	• Plaie sans potentiel de cicatrisation • Plaie avec exsudat modéré à fort • Plaie présentant des signes d'infection, car n'a pas de propriétés antimicrobiennes	Pansement primaire ou secondaire : • ne pas tailler; • doit dépasser d'au moins 2,5 cm le pourtour de la plaie. Trucs • Inscrire la date sur le pansement pour un meilleur suivi. POUR LES DÉCHIRURES CUTANÉES : • Rapprocher les lèvres de la plaie. Contrôler le saignement. Couvrir du pansement absorbant en acrylique. Laisser en place jusqu'à ce que la plaie soit guérie ou si le pourtour de la plaie présente des S&S d'infection. Si utilisé en présence d'une déchirure cutanée, indiquez, à l'aide d'une flèche, dans quel sens le retirer. • Il est recommandé de réévaluer le type de pansement si la fréquence des changements de pansements est supérieure à 1 fois/semaine. • L'utilisateur peut prendre sa douche avec ce type de pansement, puisqu'il est imperméable.

**PANSEMENT ABSORBANT AVEC
BORDURES ADHÉSIVES**

- Possède un îlot central non adhérent et bordures adhésives.
- Composé d'un film de polyuréthane, de polyester non tissé ou de polyacrylate.

Noms commerciaux (exemples)	Objectifs et indications	Contre-indications	Application et particularités
Aldress Mepore 	• Milieu humide contrôlé • Prévenir la contamination Plaie superficielle avec exsudat léger à modéré	• Exsudat modéré à fort • Plaie présentant des signes d'infection, car n'a pas de propriétés antimicrobiennes	Pansement primaire ou secondaire : • doit dépasser d'au moins 2,5 cm le pourtour de la plaie; • plaie profonde, sinus, tunnel et sous-minage : dans ce cas, nécessite un pansement primaire pour combler l'espace mort. Trucs Doit être appliqué sur une peau environnante saine.

PANSEMENT ABSORBANT MOUSSE	- Absorbe l'exsudat et maintient un milieu humide contrôlé dans le lit de la plaie. - Composé de mousse de polyuréthane à cellules ouvertes		
Noms commerciaux (exemples)	Objectifs et indications	Contre-indications	Application et particularités
Mepilex, Mepilex border Biatin   	Absorber l'exsudat - Débridement autolytique Milieu humide contrôlé - Prévenir ou soulager la douleur - Protéger le lit de la plaie Plaie superficielle ou profonde avec exsudat léger à fort (selon le niveau d'absorption)	- Plaie sans potentiel de cicatrisation - Exsudat nul ou léger - Plaie présentant des signes d'infection, car n'a pas de propriétés antimicrobiennes Incompatibilité - Hypochlorite de sodium (Dakin) - Peroxyde d'hydrogène	Pansement primaire ou secondaire : - disponible avec ou sans bordure adhésive; - plaie profonde, sinus, tunnel et sous-minage : dans cas, nécessite un pansement primaire pour combler l'espace mort; - peut-être taillé - doit dépasser d'au moins 2.5cm le pourtour de la plaie; Trucs - Si adhère à la plaie ou à la peau environnante au retrait : diminuer la fréquence des changements ou opter pour une autre catégorie de pansement. - Avec la mousse pour cavité, laisser suffisamment d'espace pour la mousse prenne de l'expansion lors de l'absorption. - L'utilisateur peut prendre sa douche avec les mousses comportant des bordures adhésives, puisqu'elles

PANSEMENT ABSORBANT FIBRES GÉLIFIANTES	• Agit grâce à un mécanisme d'échange d'ions (ou autre mécanisme) pour absorber l'exsudat permettant à la fibre de se gélifier et de se conformer au lit de la plaie. • Peut être composé de carboxyméthylcellulose, de cellulose ou d'alcool polyvinylique, se transformant en gel au contact de l'exsudat.		
Noms commerciaux (exemples)	Objectifs et indications	Contre-indications	Application et particularités
Aquacel Aquacel Extra 	• Absorber l'exsudat • Combler l'espace mort • Débridement autolytique • Milieu humide contrôlé • Protéger le lit de la plaie Plaie superficielle ou profonde avec exsudat modéré à fort	• Plaie sans potentiel de cicatrisation • Plaie avec cavité non accessible et sinus étroit • Exsudat nul ou léger • Plaie présentant des signes d'infection, car n'a pas de propriétés antimicrobiennes	Pansement primaire nécessitant un pansement secondaire : • peut être taillé, plié et superposé • disponible sous forme de feuille ou de mèche; • pour les plaies superficielles : doit déborder de 1 cm le pourtour de la plaie • pour les plaies cavitaires : laisser dépasser le ruban de 2.5 cm pour en faciliter le retrait/comblé la cavité à 80% • se gélifie au contact de l'exsudat • les fibres gélifiantes ont une faible résistance à la traction. Vérifier l'intégrité du pansement lors du retrait.

ALGINATE	• Agit grâce à un mécanisme d'échange d'ions de calcium pour des ions de sodium. Ce pansement absorbe l'exsudat et facilite l'homostase, tout en formant une substance gélatineuse non adhésive qui se conforme au lit de la plaie. • Composé de polysaccharide ou de xérogel (acide mannuronique ou acide guluronique dans différentes portions) dérivés d'extraits d'algues brunes. Peut contenir de la carboxymethylcellulose, du dilaurate de polyéthylène glycol, du nylon etc.
-----------------	---

Noms commerciaux (exemples)	Objectifs et indications	Contre-indications	Application et particularités
Pansement à l'Alginate de Calcium 	Absorber l'exsudat • Comblent l'espace mort • Débridement autolytique • Protéger le lit de la plaie • Milieu humide contrôlé • Obtenir une hémostase lorsque saignement léger Plaie superficielle ou profonde avec exsudat modéré à fort	• Plaie sans potentiel de cicatrisation • Plaie avec cavité non accessible ou sinus étroit • Exsudat nul ou léger • Plaie présentant des signes d'infection, car n'a pas de propriétés antimicrobiennes	Pansement primaire nécessitant un pansement secondaire : • Peut être taillé, plié et superposé; • disponible en mèche ou en feuille; • se gélifie au contact de l'exsudat; • les alginates ont une faible résistance à la traction. Vérifier l'intégrité du pansement lors du retrait. Trucs Si le pansement adhère au retrait, l'humidifier avant de le retirer et diminuer la fréquence des changements ou opter pour un autre type de pansement

PANSEMENT ULTRA ABSORBANT COUSSINETS ABSORBANTS	• Coussinets absorbant permet l'absorption de grandes quantités d'exsudats. Le noyau ultra absorbant retient les exsudats. La couche de contact est à faible adhérence • Aucun latex, perméable à l'air		
Noms commerciaux (exemples)	Objectifs et indications	Contre-indications	Application et particularités
Mesorb 	• Absorber l'exsudat important • Plaies difficiles à panser telles que les plaies de formes irrégulière et celle de grandes dimensions Plaies superficielles ou profondes fortement exsudatives	• Plaie présentant des signes d'infection, car n'a pas de propriétés antimicrobiennes	• Déborder la plaie de 2-4cm • Ne pas superposer les coussinets • Fixer avec un autre produit au choix • Changer selon la quantité d'exsudat et l'état de la plaie

**PANSEMENT IMPRÉGNÉ DE
CHLORURE DE SODIUM (NACI)**

- Composé de rayonne, de viscose, de coton, de cellulose ou de polyester imprégné de cristaux de chlorure de sodium à 20 %. Les cristaux de sodium entrant en contact avec l'exsudat créent un milieu hypertonique hostile aux microorganismes. Par osmose, ce pansement attire l'exsudat, les liquides interstitiels et les débris cellulaires (débridement du tissu non viable).

Noms commerciaux (exemples)	Objectifs et indications	Contre-indications	Application et particularités
Mesalt 	• Absorber l'exsudat • Milieu humide contrôlé • Comblir les espaces morts • Débridement autolytique • Absorber l'exsudat • Contrôler la charge bactérienne Plaie infectée ou non, superficielle ou profonde, avec exsudat modéré à fort.	• Plaie sans potentiel de cicatrisation • Exsudat nul ou faible Incompatibilité • stimulation électrique	Pansement primaire seulement nécessitant un pansement secondaire : • disponible sous forme de mèche ou de compresse; • peut être taillé, plié ou superposé; • nécessite de l'exsudat pour être efficace; • protéger la peau environnante avec une barrière cutanée : ne doit pas entrer en contact avec la peau environnante, car est hypertonique. Trucs Si le pansement adhère au retrait, l'humidifier au préalable et opter pour un autre pansement.

PANSEMENT NON ADHÉRENT IMPRÉGNÉ D'UN AGENT ANTIMICTOBIEN		• Composé de coton, de viscose ou de paraffine et imprégné de différentes substances antimicrobiennes. • Permet de protéger le lit de la plaie des traumatismes lors du changement de pansement. • N'ajoute pas de l'humidité dans le lit de la plaie, mais peut maintenir un certain niveau d'humidité	
Noms commerciaux (exemples)	Objectifs et indications	Contre-indications	Application et particularités
Bactigras 	• Prévenir une infection ou contrôler la charge microbienne • Protéger le lit de la plaie Plaie superficiel ou profonde avec un exsudat de nul à fort Plaie présentant des signes d'infection et d'un biofilm	Plaie avec cavité non accessible, sinus étroit • Ne pas utiliser sur plus de 10% de la surface corporelle • Ne doit pas entrer en contact avec l'œil, le cerveau, les méninges, les muqueuses génitales (risque de balanite ou de vaginite érosive), ni pénétrer le conduit auditif Incompatibilité • proviodine iodée • hypochlorite de sodium (Dakin) • agents anioniques (surfactant)	Pansement primaire nécessitant un pansement secondaire : • peut être taillé; • peut dépasser le lit de la plaie, sauf si problématique de macération. Efficace contre : bactéries à Gram+ et à Gram -

**PANSEMENT NON ADHÉRENT IMPRÉGNÉ
D'UN AGENT ANTIMICTOBIEN**

- Composé de coton, de viscose ou de paraffine et imprégné de différentes substances antimicrobiennes.
- Permet de protéger le lit de la plaie des traumatismes lors du changement de pansement.
- N'ajoute pas de l'humidité dans le lit de la plaie, mais peut maintenir un certain niveau d'humidité

Inadine (iode)



- **Prévenir une infection ou contrôler la charge microbienne**
- Protéger le lit de la plaie

Plaie avec exsudat léger à abondant

Plaie présentant des signes d'infection et d'un biofilm

Contre-indications relatives à l'usager :

- enfant prématuré et de moins de 6 mois
- grossesse et allaitement
- grand brûlé
- insuffisance rénale
- affections thyroïdiennes (larges plaies ou utilisation prolongée)

Précautions

- antécédent d'allergie à la proviodine iodée
- hypersensibilisation à l'iode est possible
- réaction cutanée locale possible (Moesch et Buxeraud, 2017b)

Pansement primaire nécessitant un pansement secondaire :

- peut être taillé;
- peut déborder sur la peau environnante.

Trucs

Une décoloration du produit dans la plaie indique que le pansement doit être changé, car la forme inactive de l'iode est incolore.

Acticoat Flex 3 (Argent)



- Milieu humide contrôlé
- Protéger le lit de la plaie
 - **Prévenir une infection ou contrôler la charge microbienne**
 - Plaie superficielle ou profonde avec exsudat faible à fort

Plaie présentant des signes d'infection et d'un biofilm

Absence d'exsudat Incompatibilité

- produits à base d'huile (ex. : oxyde de zinc, gelée de pétrole)
- radiothérapie
- IRM

Pansement primaire, nécessitant un pansement secondaire :

- peut être taillé;
- peut déborder du lit de la plaie, sauf si macération;
- utiliser de l'eau stérile avec les nanocristaux d'argent;
- le contact de l'exsudat est nécessaire pour permettre l'ionisation de l'argent.

Trucs

Le pansement non adhérent peut rester en place de 3 à 7 jours et seul le pansement secondaire est changé selon les besoins.

PANSEMENT ABSORBANT MOUSSE AVEC AGENT ANTIMICROBIEN	- Absorbe l'exsudat et maintien un milieu humide contrôlé dans le lit de la plaie. - Perméable à la vapeur d'eau et aux gaz et peut contenir de l'argent, du bleu de méthylène, du violet de gentiane ou d'autres agents antimicrobiens
--	--

Noms commerciaux (exemples)	Objectifs et indications	Contre-indications	Application et particularités
Mepilex Ag (argent) Hydrofera Blue classic Mousse de transfert PHMB 	- Absorber l'exsudat - Débridement Autolytique Milieu humide contrôlé Prévenir une infection ou contrôler la charge microbienne - Protéger le lit de la plaie Plaie superficielle ou profonde avec exsudat modéré à fort Plaie présentant des signes d'infection et d'un biofilm	- Plaie sans potentiel de cicatrisation - Exsudat nul à léger Incompatibilité - hypochlorite de sodium (Dakin) - peroxyde d'hydrogène - produits à base d'huile (ex. : oxyde de zinc, gelée de pétrole) - radiothérapie - IRM	Pansement primaire ou secondaire : - disponible en divers formats, formes et épaisseurs; être taillé; - doit dépasser d'au moins 2,5 cm le pourtour de la plaie; - garder le pansement à l'abri de la lumière; - certaines mousses ont des propriétés de micro-adhérence. Trucs - Si le pansement adhère au lit de la plaie au retrait : diminuer la fréquence des changements ou opter pour un autre type de pansement. - Avec la mousse pour cavité, laisser suffisamment d'espace pour que la mousse prenne de l'expansion lors de l'absorption. - L'utilisateur peut prendre sa douche avec une mousse ayant une bordure adhésive puisqu'elle est imperméable.

PANSEMENT ABSORBANT, FIBRES GÉLIFIANTES, TYPE HYDROFIBRE OU ÉQUIVALENT AVEC ARGENT	• Agit grâce à un mécanisme d'échange d'ions (ou autre mécanisme) qui absorbe l'exsudat et permet à la fibre de se gélifier et de se conformer au lit de la plaie. • Se transforme en gel au contact de l'exsudat grâce aux fibres synthétiques de carboxyméthylcellulose sodique. • Contient de l'argent et peut contenir un agent tensio-actif (surfactant). La composition et la quantité d'ions d'argent libérée dans la plaie varient selon les fabricants.
--	--

Noms commerciaux (exemples)	Objectifs et indications	Contre-indications	Application et particularités
Aquacel Ag Extra Aquacel Ag+ Extra  	• Absorber l'exsudat • Combler les espaces morts • Débridement autolytique • Milieu humide contrôlé • Prévenir une infection ou contrôler la charge microbienne Plaie superficielle ou profonde avec exsudat modéré à fort Plaie présentant des signes d'infection et d'un biofilm	• Plaie sans potentiel de cicatrisation • Plaie avec cavité non accessible ou sinus étroit Incompatibilité • produits à base d'huile (ex. : oxyde de zinc, gelée de pétrole) • radiothérapie • IRM	Pansement primaire nécessitant un pansement secondaire : • peut être taillé, plié et superposé; • disponible sous forme de feuille ou de mèche; • se gélifie au contact de l'exsudat • les fibres gélifiantes ont une faible résistance à la traction. Il faut vérifier l'intégrité du pansement lors du retrait; • garder le pansement à l'abri de la lumière. Trucs Si le pansement adhère au retrait, l'humidifier avant de le retirer et diminuer la fréquence des changements ou opter pour un autre type de pansement.

PANSEMENT ANTIMICROBIEN AVEC POLYHEXAMÉTHYLÈNE BIGUANIDE (PHMB)		Composé d'un polymère cationique (hydrophobe) chargé positivement.	
Noms commerciaux (exemples)	Objectifs et indications	Contre-indications	Application et particularités
Kendall AMD (compresse Curity PHMB) (Polyhexaméthylène biguanide (PHMB)) 	- Comblent l'espace mort - Milieu humide contrôlé - Prévenir une infection ou contrôler la charge microbienne Plaie avec exsudat faible à fort Plaie présentant des signes d'infection et d'un biofilm	Absence d'exsudat Incompatibilité agents antioxydants (Dakin, peroxyde d'hydrogène...)	Pansement primaire nécessitant un pansement secondaire : - peut être taillé; - disponible sous forme de compresses, de mèches ou de rouleaux imprégnés de PHMB de 0,2 %; - disponible en mousse imprégnée de PHMB à 0,5 %; - le pansement ne relâche pas de PHMB, mais procure son effet dans le pansement. La présence d'exsudat est donc nécessaire.

MIEL MÉDICAL		Composé de miel de <i>Leptospermum scoparium</i> ou de <i>Leptospermum polygalifolium</i> ayant une action osmotique puissante.	
Noms commerciaux (exemples)	Objectifs et indications	Contre-indications	Application et particularités
Medihoney 	Débridement autolytique Milieu humide contrôlé Prévenir une infection ou contrôler la charge microbienne Plaie avec exsudat léger à fort Plaie présentant des signes d'infection et d'un biofilm	- Plaie sans potentiel de cicatrisation - Plaie avec cavité non accessible ou sinus étroit (selon le type de pansement) - Sensibilité au venin d'abeille, aux abeilles ou au miel - Plaie de grande dimension chez un usager diabétique (risque de débalancement de la glycémie)	Pansement primaire et peut nécessiter un pansement secondaire (si en gel ou pâte) : disponible sous forme de gel, d'hydrogel, de pâte, hydrocolloïde ou d'alginate.

PANSEMENT ABSORBANT CHARBON ACTIF AVEC ARGENT	• Contient du charbon actif destiné à absorber les odeurs nauséabondes (plaies infectées ou néoplasiques) par l'absorption des toxines et des produits de dégradation de la plaie et par l'absorption des amines volatiles et des acides gras responsables de l'odeur. • Contient du charbon actif et un composé d'argent; peut contenir différents types de matériaux comme le nylon.		
Noms commerciaux (exemples)	Objectifs et indications	Contre-indications	Application et particularités
Actisorb Silver 220 	• Prévenir une infection et contrôler la charge microbienne • Contrôler les odeurs • Milieu humide contrôlé Plaie superficielle ou profonde avec exsudat léger à modéré Plaie présentant des signes d'infection et d'un biofilm	Incompatibilité • produits à base d'huile (ex. : oxyde de zinc, gelée de pétrole, etc.); • radiothérapie • IRM	Pansement primaire ou secondaire : • ne pas tailler; • doit être bien étanche pour être efficace; • certains pansements au charbon sont inactivés par l'humidité (exsudat). Trucs • Il importe de traiter la cause de l'odeur avant d'appliquer un pansement au charbon. • L'utilisation des pansements au charbon avec la thérapie par pression négative est contre-indiquée. S'il y a présence d'odeur avec la thérapie par pression négative, traiter la cause.

PANSEMENT ANTIMICROBIEN À BASE DE CADEXOMÈRE D'IODE		• Le cadexomère d'iode est un antimicrobien non cytotoxique à cause de sa structure chimique qui favorise une libération lente d'iode. • Il absorbe l'exsudat, forme un gel à la surface de la plaie et aide au débridement autolytique. • Efficace contre plusieurs agents pathogènes • Se présente en onguent ou en pâte	
Noms commerciaux (exemples)	Objectifs et indications	Contre-indications	Application et particularités
Iodosorb 	Prévenir une infection ou contrôler la charge microbienne, débridement autolytique • Plaie avec exsudat léger à abondant • Plaie avec tissus nécrotiques humides Plaie présentant des signes d'infection et d'un biofilm	Sensibilité à l'iode (connue ou soupçonnée) • Problèmes thyroïdiens • Femme enceinte ou qui allaite • Insuffisance rénale grave • Thérapie à base de lithium à cause de l'interaction médicamenteuse • Combiné à la thérapie de stimulation électrique • Combiné à l'usage d'antiseptiques • Enfants	Pansement primaire nécessitant un pansement secondaire. • Onguent : badigeonner l'onguent sur une compresse pour en faciliter l'application ou l'appliquer à l'aide d'une tige montée mouillée ou abaisse-langue Peut demeurer en place 72 heures max., changer au besoin selon l'exsudat. Vérifier la coloration du produit parce qu'une décoloration indique une libération complète de l'iode, donc une saturation du pansement.

Coordonnées		
Filsan Abdi	Conseillère en soins de plaies et stomathérapie	Cellulaire 579-491-5028
Julie Bélanger	ICASI programmation en soins de plaies et stomathérapie	Cellulaire : 579-491-3879
Caroline Aucoin	Conseillère en soins de plaies et stomathérapie	Cellulaire : 514-617-8841

--