

La démarche d'accréditation des laboratoires : une responsabilité partagée et source de fierté!

En préparation de la visite, voici une capsule d'information concernant les examens de biologie médicale délocalisée (EBMD).



Qu'est-ce qu'un EBMD ?

Les examens classiques portant sur les fluides biologiques, les excréments et les tissus des usagers sont généralement effectués dans l'environnement maîtrisé et régulé d'un laboratoire de biologie médicale accrédité. Les EBMD sont des examens réalisés par un professionnel ou un médecin de l'établissement avec du matériel autorisé à proximité de l'utilisateur ou à l'endroit où il se trouve. Le résultat peut entraîner une éventuelle modification des soins prodigués à l'utilisateur.

Exemples d'un EBMD :


- Glucomètre, bilirubinomètre, RASC Pronto, CoaguChek, bandelettes urinaires, test de grossesse, HemoCue, pH gastrique, pH vaginal, etc.

Points importants lors de l'exécution d'un EBMD

- **Toutes demandes d'analyse** écrite ou par l'entremise d'une ordonnance collective ou une ordonnance préimprimée sont **considérées comme un contrat** entre le demandeur et le laboratoire de biologie médicale;
- Procéder à la **double identification** de l'utilisateur;
- Procéder de manière efficace et sécuritaire. Le port de l'équipement de protection individuelle (EPI) comme des **gants est obligatoire**;
- S'assurer d'utiliser l'identification unique avant de procéder à l'analyse. Seuls les professionnels qui possèdent la **formation et les compétences** nécessaires sont autorisés à utiliser les appareils d'EBMD ou réaliser un EBMD manuel;
- **Nettoyer les appareils** après leur utilisation;
- **Inscrire la date d'ouverture** sur les bouteilles de réactifs et de contrôles de qualité;
- **Inscrire le résultat** au dossier patient en spécifiant qu'il s'agit d'un **EBMD**.



- Tout EBMD **doit être connu et encadré par le laboratoire** : un EBMD non-encadré ne peut être utilisé;
- Il est donc primordial de se **référer à la documentation** permettant d'encadrer l'utilisation d'un EBMD et de la **respecter**. La documentation est disponible dans les **répertoires des analyses** ainsi que dans l'**intranet et extranet**.

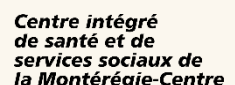



Informations importantes

- S'assurer de **ne pas utiliser de produits expirés**;
- **S'assurer que les contrôles de qualité** ont été effectués à la fréquence recommandée et qu'ils se situent à l'intérieur des valeurs cibles;
- Lors de résultats de contrôle de qualité **en dehors de limite cible, l'EBMD ne doit pas être utilisé**;
 - ✓ Tout événement indésirable en lien avec les EBMD **doit être déclaré par l'entremise de la déclaration d'incident-accident**.
- L'entretien et la maintenance des appareils d'EBMD ainsi que les contrôles de qualité utilisés doivent être exécutés afin de s'assurer de la qualité des résultats obtenus;
- La maintenance des appareils effectuant des EBMD ainsi que les contrôles de qualité **doivent être documentés** dans les registres appropriés et acheminés chaque mois au responsable des EBMD;
- Tout échantillon utilisé pour un EBMD pouvant être identifié doit être double identifié :
 - ✓ Nom, prénom;
 - ✓ RAMQ ou numéro de dossier.
- Tout résultat d'EBMD **doit être consigné au dossier de l'utilisateur ou sur un formulaire de résultats d'analyse** spécifique à l'EBMD et déposé dans le dossier de l'utilisateur ou dans le dossier électronique de l'utilisateur.

Exemple de consigne manuelle au dossier à respecter:

Streptest fait en EBMD
Prélèvement: 2023-09-13 15:00
Analysé: 2023-09-13 15:15
Résultat: Positif
Fait par: Lucie Champlain Inf 123456



Les équipements

Les équipements réalisant des analyses tels que les glucomètres, bilirubinomètres, etc., doivent être utilisés selon les protocoles en vigueur. La maintenance de ces équipements doit être effectuée périodiquement et documentée dans le registre approprié. **Lorsqu'un équipement se révèle défectueux, il doit être mis hors service et clairement identifié.** Le formulaire de demande de vérification doit être rempli et envoyé avec l'instrument au laboratoire pour le CISSSMC et CISSSMO ou au service de génie biomédical pour le CISSSME.



Le matériel

L'intégrité du matériel reçu doit être vérifiée. Le matériel utilisé pour les examens de biologie médicale délocalisés tels que les bandelettes de glucomètres, les bandelettes urinaires, les contrôles de qualité doit être vérifié par les utilisateurs avant utilisation. Cette vérification doit être documentée au formulaire spécifique de l'EBMD ainsi que sur la boîte. C'est ce qui permet d'offrir des soins sécuritaires aux usagers.



Merci à l'ensemble du personnel
pour leur appui.

